

Clean-Trace™

NG Luminometer

3M™ クリーントレース™
データトレンドイングソフトウェア
取扱説明書



目次

0. ソフトウェアのインストール	5
0.1.1 ソフトウェアのインストール	5
0.1.2 ドライバのインストール	6
1. メインメニュー	9
2. 初期設定	10
2.1.1 日本語の設定	10
2.2.2 パスワードの変更	10
3. 管理	12
3.1 ベーシックセットアップ	12
3.1.1 ポートの選択	12
3.1.2 通信状況のチェック	13
3.1.3 ファームウェアの表示	13
3.1.4 機器のセットアップ	14
3.1.5 サイト ID・事業所・部門の設定	16
3.1.6 洗浄剤・洗浄方法・洗浄器具の設定	17
a) 洗浄剤	17
b) 洗浄方法	17
c) 洗浄器具	17
3.1.7 ユーザー定義フィールドの設定	18
3.2 サンプルプランの作成	19
3.2.1 サンプルプランとは	19
3.2.2 プランの作成	19
a) テストポイントの入力	19
b) 衛生管理計画	21
3.3 サンプルプランの編集	24
3.3.1 テストポイントを編集する	25
a) テストポイントの名前を変更する	25
b) 衛生管理計画を変更する	26
3.3.2 テストポイントを追加する	26
3.3.3 テストポイントを削除する	26
3.3.4 サンプルプランを削除する	27
3.4 サンプルプランを見る	28
3.5 データベースのメンテナンス	29
3.5.1 データベースのメンテナンス	30

目次

a) フォルダの設定.....	30
b) バックエンドファイルの圧縮.....	32
c) バックエンドファイルの修復.....	33
d) バックエンドファイルのリンク.....	34
3.5.2 データのインポート・エクスポート.....	36
a) サンプルプランとテストポイントのインポート.....	36
b) 試験結果のインポート.....	38
c) データベースのバックアップ.....	40
d) 試験結果の保存.....	41
e) サンプルプランの保存.....	43
f) 機器のリセット.....	45
3.5.3 言語.....	45
a) メッセージ.....	45
b) フォーム/レポートの翻訳.....	45
c) 翻訳のインポート.....	45
4. 通信.....	46
4.1 サンプルプランの転送.....	46
4.2 試験結果の転送.....	47
5. 分析.....	48
5.1 結果の分析.....	48
5.1.1 結果の表.....	48
a) 結果の表から確認できる項目.....	49
a) 日付によるフィルタ.....	51
b) 項目別のフィルタ.....	51
c) フィルタの保存.....	53
d) フィルタを見る.....	53
e) 保存されたフィルタの適用.....	53
f) データのリセット.....	54
g) レイアウト保存.....	54
h) 試験結果の一覧.....	54
5.1.3 カラムを隠す/表示する.....	55
5.1.4 データの編集.....	56
a) データを編集する.....	56
b) 編集が可能な項目.....	57
c) 再試験結果の追加と編集.....	57

目次

d) 監査証跡のプレビュー	60
5.1.5 データの追加	61
a) サンプルプランにデータを追加する	61
b) 再試験結果の追加と編集	63
5.1.6 データのエクスポート	63
5.1.7 レポート	65
a) 分析レポート	65
b) グラフ分析	71
5.1.8 印刷/衛生管理を見る	80
5.2 グラフウィザード	82
5.2.1 グラフの種類を選択する	83
5.3 計画外の分析	85
5.3.1 計画外のテストの結果の印刷	85
5.3.2 計画外のテストの結果のエクスポート	88
6 その他	90
6.1 パスワードの初期化	90

0. ソフトウェアのインストール

0. ソフトウェアのインストール

製品添付の CD-ROM に含まれるソフトウェア“3M Clean-Trace Data Trending Software.exe”は、Windows® XP、Windows Vista®および Windows® 7 にて動作することを確認しております。


パソコンのユーザー権限の設定によっては適切に動作しない場合があります。管理者権限でインストールをおこない、初回の起動時にも管理者として実行することをお勧めします。

0.1.1 ソフトウェアのインストール


1. セットアップファイル“3M Clean-Trace Data Trending Software.exe”を起動します。Windows Vista および Windows 7 の場合には、通常のユーザーでログインし、右クリックメニューから「管理者として実行」を選択することもできます。



2. 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

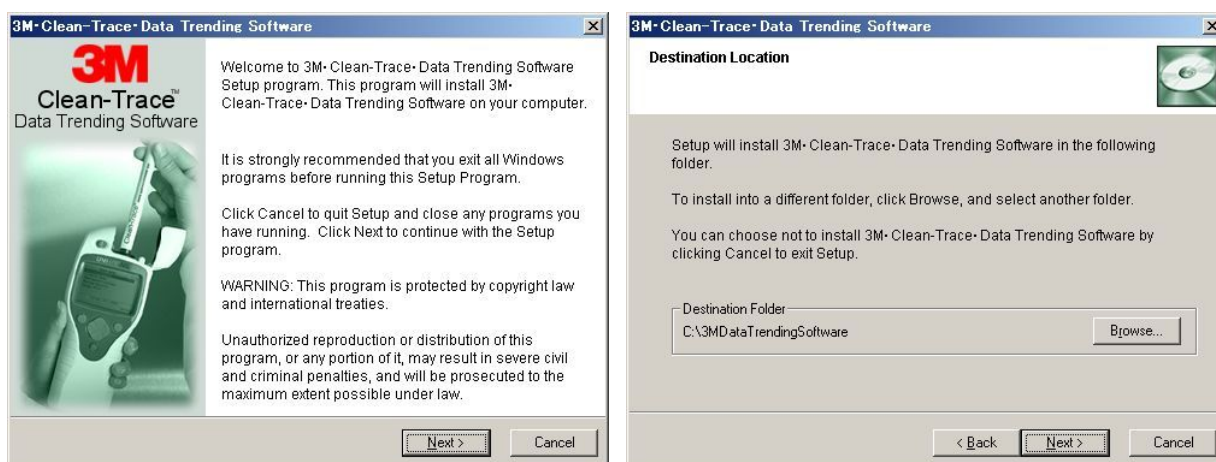



3. デスクトップのアイコンもしくはスタートメニューからプログラムを起動し、正常に動作することを確認します。Windows Vista および Windows 7 の場合には、初回のみ、右クリックメニューから「管理者として実行」を選択してください。

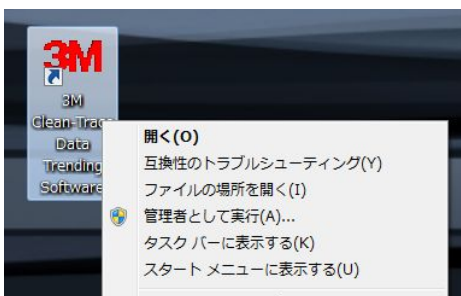

0. ソフトウェアのインストール

0.1.2 ドライバのインストール

1. 3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。
2. UNG3 の電源を入れます。
3. 新しいハードウェアの検出ウィザードに従って USB ドライバをインストールします。

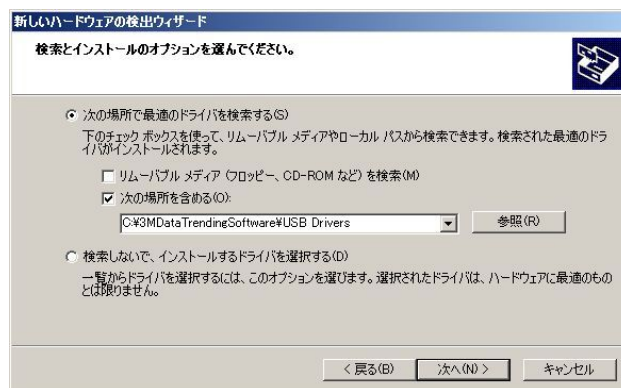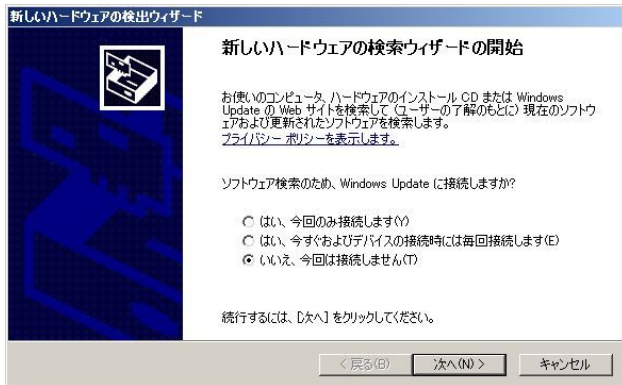


- ・ USB ドライバの場所は手動で指定します。ソフトウェアをインストールしたフォルダの中にある“USB Drivers”のフォルダ（通常は“C:\3MDataTrendingSoftware\USB Drivers”）を指定してください。
- ・ ここでは、USB シリアルコンバーター(“FTDIBUS. INF”)と仮想シリアルポート(“FTDIPORT. INF”)の 2 種類のドライバをインストールします。通常は新しいハードウェアの検出ウィザードが 2 回起動しますので、上記の手順を繰り返すだけでインストールが完了します。何らかの原因でドライバがインストールできなかった場合には、UNG3 とパソコンを付属の USB ケーブルで接続し、UNG3 の電源を入れた状態で、デバイスマネージャからドライバをインストールしてください。
- ・ Windows Vista および Windows 7 にソフトウェアをインストールする際に、ドライバのインストールが自動でおこなわれない場合があります。この場合にも、デバイスマネージャからドライバをインストールしてください。
- ・ 他の USB 機器が接続されている場合、ドライバのインストールがうまくおこなわれない場合があります。機器を取り外してからドライバのインストールをおこなうことをお勧めします。


0. ソフトウェアのインストール

(Windows XP の場合)


- ・ デバイスマネージャは、デスクトップ上にある「マイコンピュータ」の右クリックメニューの「プロパティ」や「管理」などから開くことができます。

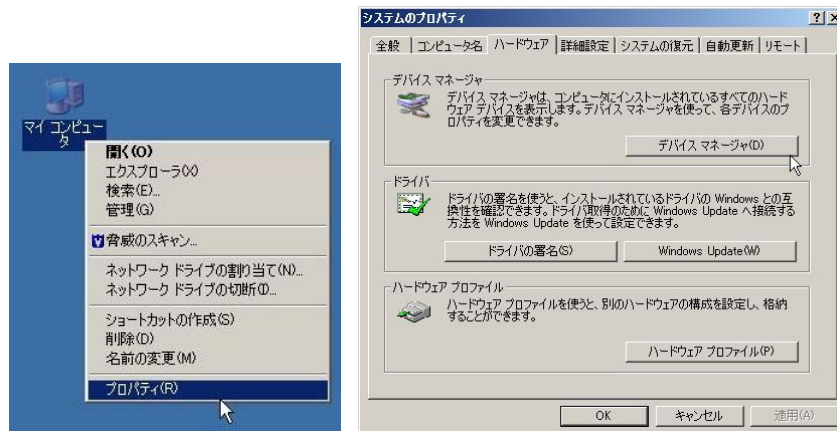


- ・ ドライバが正常にインストールされると、以下のような状態になります。

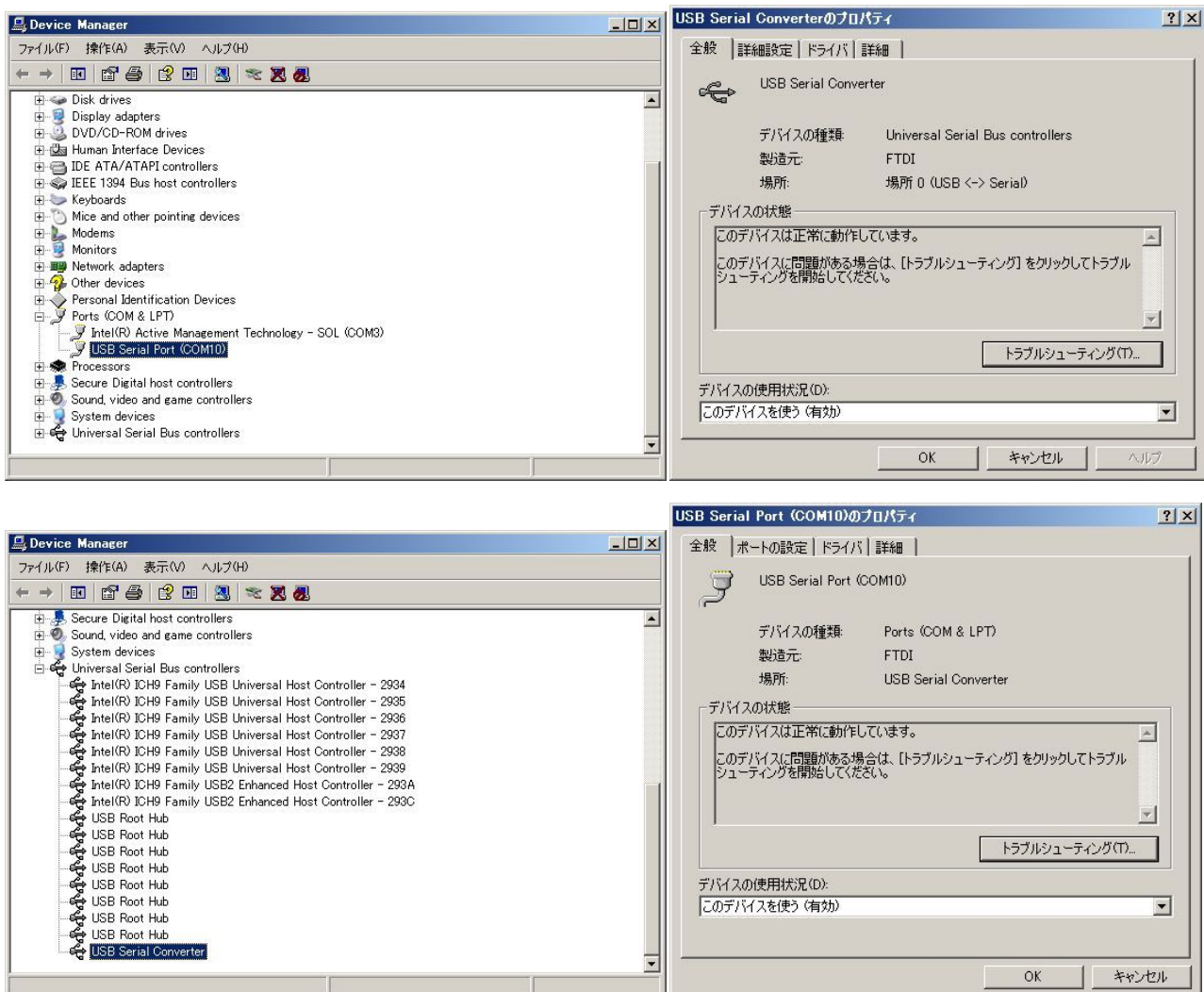

0. ソフトウェアのインストール

- ・ ドライバが正しくインストールされていない場合には、「ポート (COM と LPT)」「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」「その他のデバイス」などの項目が  のように表示されます。該当する項目を展開し、右クリックメニュー等からドライバの更新をおこなってください。

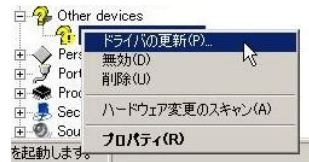


(Windows Vista、Windows 7 の場合)

- ・ デバイスマネージャは、デスクトップ上やスタートメニューにある「コンピュータ」の右クリックメニューの「プロパティ」や「管理」などから開くことができます。
- ・ ドライバが正しくインストールされていない場合には、「ポート (COM と LPT)」「ユニバーサルシリアル バス コントローラ」「ほかのデバイス」などの項目のアイコンに「？」や「！」が表示されます。該当する項目を展開し、右クリックメニュー等からドライバの更新をおこなってください。

1. メインメニュー

1. メインメニュー

プログラムを起動すると「メインメニュー」が表示されます。画面の上部に「メニューバー」および「ツールバー」が表示されます。

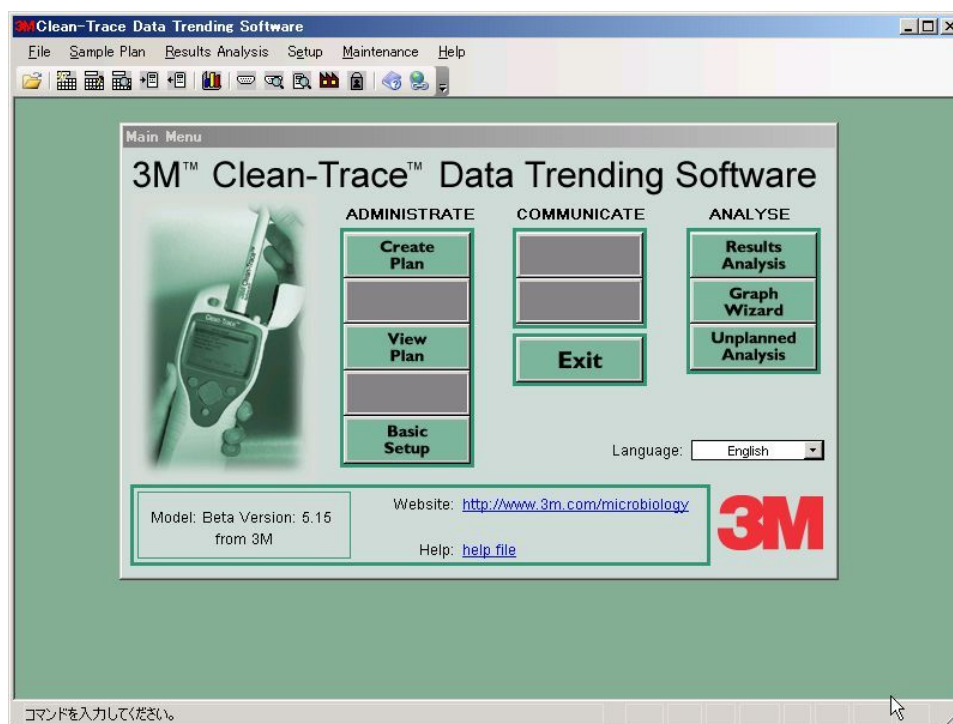


2. 初期設定

2. 初期設定


2.1.1 日本語の設定

1. 「言語」のドロップダウンリストから「日本語」を選択します。

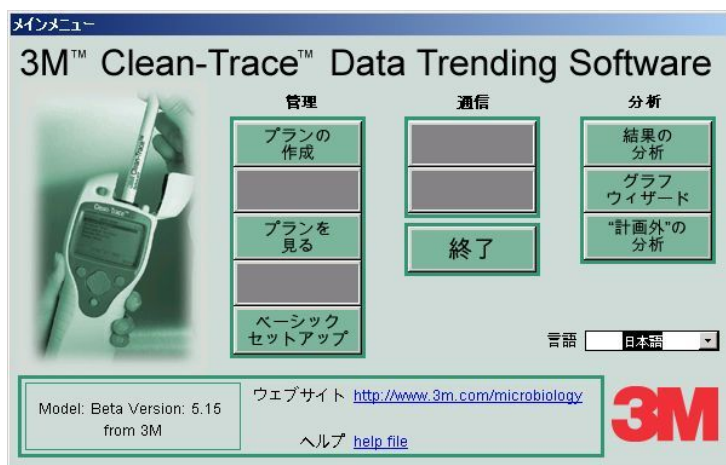

2.2.2 パスワードの変更

1. 「ベーシックセットアップ」をクリックします。
「229: 通信ポートエラー」のメッセージが出た場合には「OK」をクリックします。

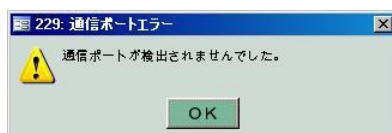

2. 「パスワードの変更」をクリックします。




3. 古いパスワードを入力します。


初期設定は temp123 となっています。

日本語入力が ON になっているとパスワードがうまく入力できません。この場合、入力した文字数よりも「*」の数が少なく表示されます。日本語入力を OFF にしてからパスワードを入力してください。


2. 初期設定

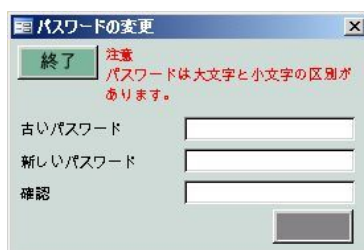


4. 新しいパスワードを入力します。
5. 「確認」のテキストボックスに新しいパスワード（上記と同じのもの）を入力します。
6. Enter キーもしくは Tab キーを押すと「変更の保存」ボタンが表示されます。
「終了」をクリックするとパスワードは変更されませんのでご注意ください。
7. 「変更の保存」をクリックすると、新しいパスワードが保存されます。

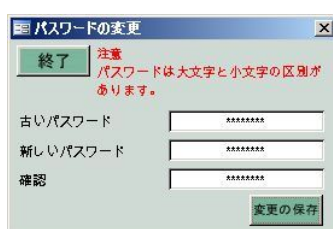

8. 「OK」をクリックします。

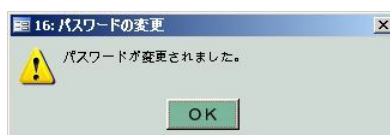

メインメニューが以下の表示になっていることを確認してください。

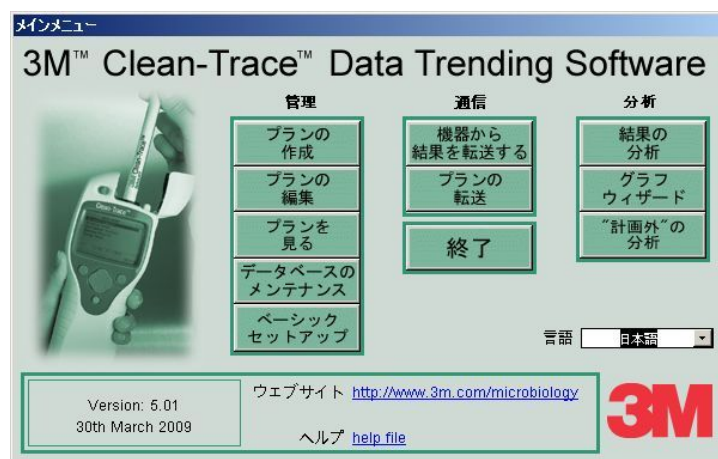


3.1 ベーシックセットアップ

3. 管理

3.1 ベーシックセットアップ

通信ポートの設定、通信状況の確認、3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 のファームウェアの表示、工場名や部門名などの設定、パスワードの変更などをおこないます。

1. メインメニューにて「ベーシックセットアップ」をクリックします。「ベーシックセットアップ」が表示されます。

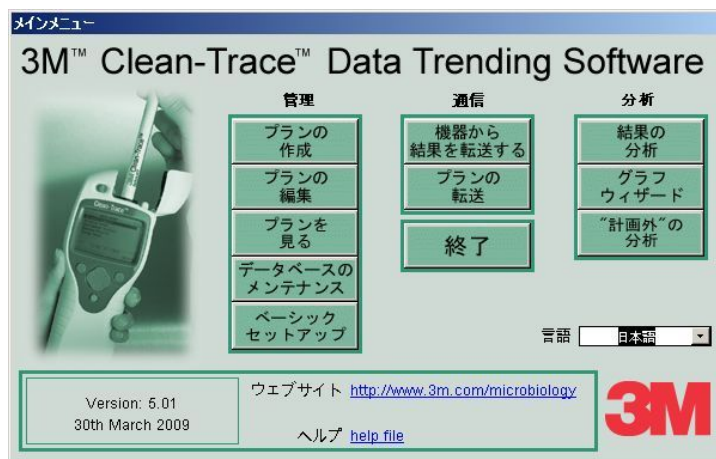

3.1.1 ポートの選択

使用する通信ポートを選択します。

1. 「ポート」のドロップダウンリストより、使用する通信ポートを選択します。

環境によって異なりますが、USB ケーブルで接続する場合には「COM13 (USB)」などと表示されるポートを選択してください。

COMポートの番号が16以上の場合、うまく接続できない場合があります。デバイスマネージャより、ポートの番号を15以下に変更してください。（プロパティ→ポートの設定→詳細設定）



3.1 ベーシックセットアップ


3.1.2 通信状況のチェック

3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 とパソコンが接続され、電源が入っていることを確認します。

1. 「通信状況のチェック」をクリックします。



2. 通信がおこなわれた場合には「65: 通信 OK」が、通信がおこなわれなかった場合には「47: 通信不良」が表示されます。

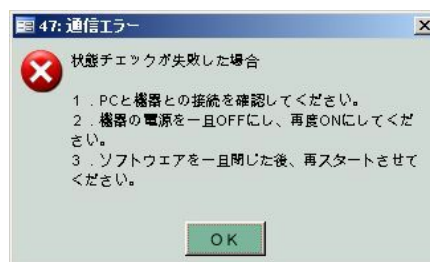

3. 「OK」をクリックします。

USB ケーブルの接続直後や UNG3 がスタンバイモードになっている場合、通信がおこなわれない場合があります。そのような場合には再度「連絡状況のチェック」をクリックしてください。

3.1.3 ファームウェアの表示


UNG3 のファームウェアを表示します。

1. 「ファームウェア表示」をクリックします。



2. ファームウェアが表示されます。UNG3 が接続されていない場合には「47: 通信不良」が表示されます。

3.1 ベーシックセットアップ

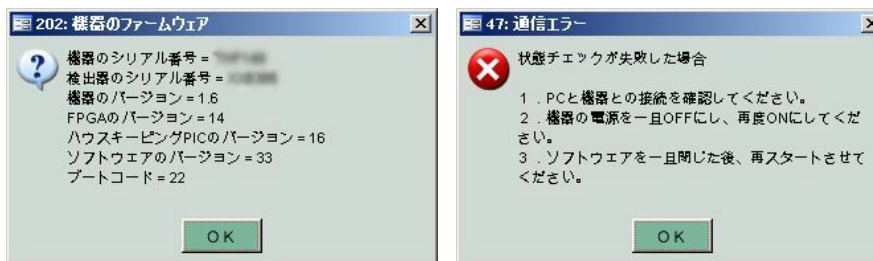

3. 「OK」をクリックします。


3.1.4 機器のセットアップ

3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 の設定を変更します。

1. 「機器のセットアップ」をクリックします。



2. 必要な項目を設定した後に、UNG3 とパソコンを接続した状態で「更新」をクリックします。

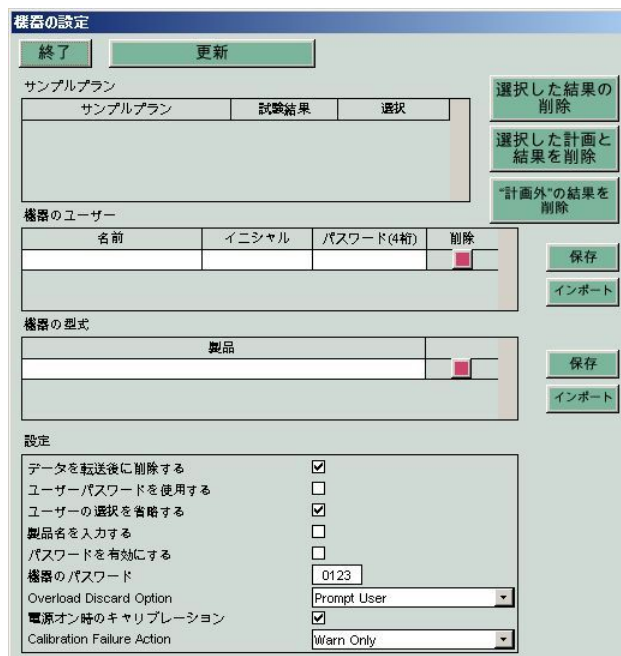

3.1 ベーシックセットアップ

機器の設定

終了 更新

サンプルプラン

サンプルプラン	試験結果	選択

選択した結果の削除
選択した結果とプランの削除
“計画外”の結果を削除

機器のユーザー

名前	イニシャル	パスワード(4桁)	削除
金井 勇治	YK	0000	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

保存 インポート

機器の型式

製品	削除
小麦粉	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

保存 インポート

設定

データを転送後に削除する	<input checked="" type="checkbox"/>
ユーザーパスワードを使用する	<input type="checkbox"/>
ユーザーの選択を省略する	<input type="checkbox"/>
製品名を入力する	<input checked="" type="checkbox"/>
パスワードを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
機器のパスワード	0123
Overload Discard Option	Prompt User
電源オン時のキャリブレーション	<input checked="" type="checkbox"/>
Calibration Failure Action	Warn Only

- 「機器の型式」は「製品名」（食材の種類）の誤りです。「設定」の項目において「製品名を入力する」にチェックを入れておくと、プログラムモードおよび計画外のテストの測定前に、食材の種類（製品名）を50音表から入力することができます。このとき、「製品名」（食材の種類）を事前に登録しておくと、一覧からの選択も可能になります。
- 「パスワードを有効にする」にチェックを入れた場合には、測定装置の電源投入直後に「機器のパスワード」の入力が必要になります。
- 「ユーザーパスワードを使用する」にチェックを入れ、「ユーザーの選択を省略する」のチェックを外した場合には、プログラムモードおよび計画外のテストの測定前に、「機器のユーザー」で設定したユーザーの選択とパスワードの入力が必要になります。

3.1 ベーシックセットアップ

3.1.5 サイト ID・事業所・部門の設定

1. 「サイト ID・事業所・部門」をクリックします。



2. 詳細を入力します。

項目	入力例
サイト ID	会社名・工場名・店舗名
事業所	工場名・店舗名
部門	部門名・ライン名
管理者	管理者名・責任者名

- ・ 通常は「サンプルプラン」の設定だけでも運用は可能です。
- ・ 複数の 3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 を用いて複数の事業所のデータを一元管理する場合には「サイト ID」等の設定を活用すると集計が容易になります


3. 「終了」をクリックします。

3.1 ベーシックセットアップ

3.1.6 洗浄剤・洗浄方法・洗浄器具の設定

洗浄に関する情報を登録します。

1. 「洗浄剤・方法・器具」をクリックします。

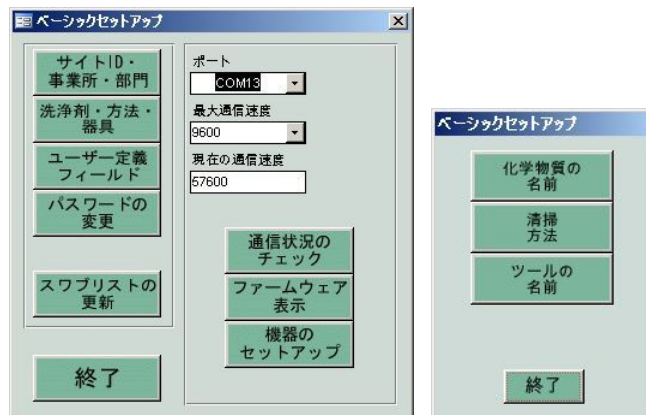

a) 洗浄剤

1. 「化学物質の名前」をクリックします。
2. 洗浄剤の名称を入力します。(例：中性洗剤、次亜塩素酸ソーダ)
3. 「終了」をクリックします。

b) 洗浄方法

1. 「清掃方法」をクリックします。
2. 洗浄方法を入力します。(例：手洗い洗浄、浸漬洗浄、CIP)
3. 「終了」をクリックします。

c) 洗浄器具

1. 「ツールの名前」をクリックします。
2. 洗浄に使用する器具の名称を入力します。(例：ブラシ、スプレーボール)
3. 「終了」をクリックします。



3.1 ベーシックセットアップ

3.1.7 ユーザー定義フィールドの設定

ソフト内で使用するフィールドのうち4つの未定義のラベル名を変更することができます。

設定したラベル名は測定結果の一覧に表示され「データの編集」にて内容を編集することができます。

他のフィールドと同様にフィルタリングやソートに用いることもできます。

方法	ツール	重要度	UD1	UD2	UD3	UD4
	スポンジ					
	スポンジ	要注意				
	ブラシ					

1. 「ユーザー定義フィールド」をクリックします。



2. いずれかのテキストボックス (UD1～UD4) をクリックして、ラベル名を入力します。



3. 「終了」をクリックします。

3.2 サンプルプランの作成

3.2 サンプルプランの作成


新しいサンプルプランを作成します。サンプルプランの名称と作成者名を入力すると、テストポイントリストが表示され、各テストポイントについて、部門名、合格レベル、不合格レベル、担当者名などを設定することができます。

3.2.1 サンプルプランとは


サンプルプランは、衛生管理計画において使用される複数のテストポイントに対して設定する名前です。製造ラインの Critical Control Points (CCPs) やリスクエリア、製造設備の一部などが相当します。サンプルプランは最大 300 点のテストポイントから構成されます。大きなサンプルプランを作成するよりも、小さいサンプルプランを複数作成したほうが効率的です。実情に沿った、試験の要求に合致したサンプルプランを作成することが重要です。

3.2.2 プランの作成

1. メインメニューにて「プランの作成」をクリックします。

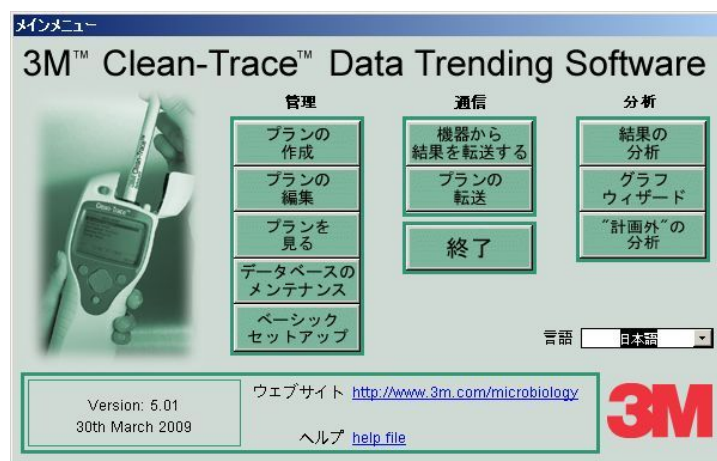

2. 「サンプルプランの作成」が表示されます。

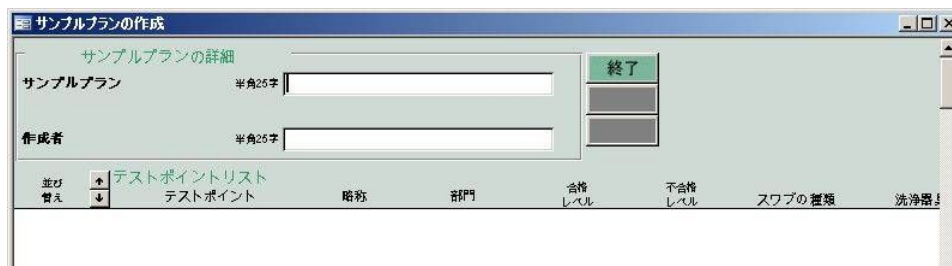

3. サンプルプランの名称を入力します。(半角 25 文字以内)
4. 作成者の名前を入力します。(半角 25 文字以内)
5. Enter キーもしくは Tab キーを押すとテストポイントリストが表示されます。

a) テストポイントの入力

1. 1 行目の「テストポイント」のカラムをクリックします。

3.2 サンプルプランの作成

2. テストポイントの名称を入力します。(例：調理台、製品タンク)
3. Tab キーを押すと自動的に「略称」が表示されます。(例：調理 001、製品 001)
2 行目以降は「合格レベル」と「不合格レベル」も自動的に入力されます。
4. 「部門」のドロップダウンリストに部門と事業所の一覧が表示されます。
5. ドロップダウンリストから部門を選択します。部門名と事業所名は「ベーシックセットアップ」で設定しておく必要があります。
6. 「合格レベル」および「不合格レベル」を入力します。合格レベルと不合格レベルの間は「注意」を意味します。「合格レベル」および「不合格レベル」の設定については、別冊の「ATP 基準値作成ハンドブック」をご参照ください。
7. 必要に応じて「スワブの種類」「洗浄器具」「洗浄剤」「洗浄方法」を選択します。TAB キーを押すとセルを移動することができます。

8. テストポイント、合格レベル、不合格レベル、および必要な項目を入力してから次の行に移動すると「保存」ボタンが表示されます。必要な数のテストポイントを設定した後に「保存」をクリックすると、サンプルプランが保存され、「メインメニュー」に戻ります。
9. テストポイントは最大 300 まで入力することができます。「アクティブ」にチェックの入ったテストポイントが有効となります。
10. 衛生管理担当者を入力する場合は「MSS」をクリックします。詳細は以下の「衛生管理計画」の項目をご参照ください。
11. リスト左上にある「並び替え」の矢印をクリックすると、テストポイントの順番を変更することができます。
12. 「印刷」をクリックすると、サンプルプランの印刷、Microsoft Word、Microsoft Excel への転送ができます。

3.2 サンプルプランの作成

サンプルプラン詳細

サンプルプラン: サンプルプランA
 略称:
 作成者名: 作成者A
 作成日時: 2009/04/24
 サイトID: スリーエムヘルスケア

テストポイント

Order	テストポイント	番号	事業所	部門	合格レベル	不合格レベル	アクティブ	衛生管理担当者	頻度
1	テストポイントA	テスト001	相模原事業所	食品安全市場プロジェクト	150	300	<input checked="" type="checkbox"/>		

b) 衛生管理計画

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理計画の進捗を確認するためのツールです。

サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を設定すると、スケジュールを一目で確認できるようになります。

1. テストポイントリストの「MSS」をクリックします。

サンプルプランの作成

終了
印刷

合格レベル	不合格レベル	スワブの種類	洗浄器具	洗浄剤	洗浄方法	アクティブ	衛生管理担当者	MSS
						<input type="checkbox"/>		MSS
						<input type="checkbox"/>		MSS
						<input type="checkbox"/>		MSS

2. 「衛生管理計画」が表示されます。

衛生管理計画

終了 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
 サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を設定すると、スケジュールを一目で確認できるようになります。

サンプルプラン: サンプルプランA
 テストポイント: テスト001
 担当者: 担当者A

頻度

☒ 毎日 毎 1 日
☐ 平日のみ
☐ 土日のみ
☐ 毎週
☐ 毎月

設定期間

開始日: 2009/04/24 Friday
☒ 終了日無し
☐ 回数を指定
☐ 終了日を指定

3. 「担当者」に担当者名を入力します。ドロップダウンリストから選択することもできます。
4. 試験の頻度を「毎日」「平日のみ」「土日のみ」「毎週」「毎月」から選択します。
5. 開始日は本日の日付が自動的に入力されますので、必要に応じて変更します。
6. 期間を「終了日無し」「回数を指定」「終了日を指定」から選択します。
7. 「保存」をクリックします。「終了」をクリックすると保存されません。

「サンプルプランの作成」あるいは「サンプルプランの編集」に戻ります。

衛生管理計画を編集した場合、「サンプルプランの作成」もしくは「サンプルプランの編集」にて緑色の「MSS」ボックスの左側に赤い点が表示されます。この点は、衛生管理計画を変更したこと

3.2 サンプルプランの作成

を表します。「サンプルプランの作成」もしくは「サンプルプランの編集」を終了するとこの点は消えます。

アクティ イブ		衛生管理担当者
<input checked="" type="checkbox"/>		担当者A
<input type="checkbox"/>		

8. 設定した衛生管理計画は「結果の分析」から表示することができます。

Clean-Trace Data Trending Software - [rptTempMCS]

衛生管理計画 May 2009

凡例: A= 予定日, O= 未実施

サンプルプラン: サンプルプラン2

衛生管理担当者	テストポイント	頻度	Fri 01	Sat 02	Sun 03	Mon 04	Tue 05	Wed 06	Thu 07	Fri 08	Sat 09	Sun 10	Mon 11	Tue 12	Wed 13	Thu 14	Fri 15	Sat 16	Sun 17	Mon 18	Tue 19	Wed 20
担当者B	テストポイント1	平日のみ	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A
担当者B	テストポイント2	1 週	A							A												

衛生管理計画の種類

- 毎日：毎日であれば1を、隔日であれば2を入力します。

衛生管理計画

終了 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を
設定すると、スケジュールを一目で確認できるようになります。

サンプルプラン: サンプルプランA

テストポイント: テス001

担当者: 担当者A

頻度

☒ 毎日 毎 1 日

☐ 平日のみ

☐ 土日のみ

☐ 毎週

☐ 毎月

設定期間

開始日: 2009/04/24 Friday

☒ 終了日無し

☐ 回数を指定

☐ 終了日を指定

3.2 サンプルプランの作成

- 平日のみ

衛生管理計画

終了 保存 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を
設定すると、スケジュールを一目で確認することができます。

サンプルプラン: サンプルプランA
テストポイント: テス001
担当者: 担当者A

頻度

☐ 毎日
☒ 平日のみ
☐ 土日のみ
☐ 毎週
☐ 毎月

設定期間

開始日: 2009/04/24 Friday
☒ 終了日無し
☐ 終了日を指定

- 土日のみ

衛生管理計画

終了 保存 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を
設定すると、スケジュールを一目で確認することができます。

サンプルプラン: サンプルプランA
テストポイント: テス001
担当者: 担当者A

頻度

☐ 毎日
☐ 平日のみ
☒ 土日のみ
☐ 毎週
☐ 毎月

設定期間

開始日: 2009/04/24 Friday
☒ 終了日無し
☐ 終了日を指定

- 毎週: 毎週であれば1を、隔週であれば2を入力します。

衛生管理計画

終了 保存 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を
設定すると、スケジュールを一目で確認することができます。

サンプルプラン: サンプルプランA
テストポイント: テス001
担当者: 担当者A

頻度

☐ 毎日
☐ 平日のみ
☐ 土日のみ
☒ 毎週
☐ 毎月

毎 1 週

設定期間

開始日: 2009/04/24 Friday
☒ 終了日無し
☐ 回数を指定 1 回後に終了
☐ 終了日を指定

- 毎月: 毎月であれば1を、隔月であれば2を入力します。

衛生管理計画

終了 保存 削除

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理の進捗を確認するためのツールです。
サンプルプランを作成する際にテストポイントを衛生管理計画に登録し、試験の頻度を
設定すると、スケジュールを一目で確認することができます。

サンプルプラン: サンプルプランA
テストポイント: テス001
担当者: 担当者A

頻度

☐ 毎日
☐ 平日のみ
☐ 土日のみ
☐ 毎週
☒ 毎月

毎 1 月

設定期間


開始日: 2009/04/24 Friday
☒ 終了日無し
☐ 回数を指定 1 回後に終了
☐ 終了日を指定

3.3 サンプルプランの編集

3.3 サンプルプランの編集

作成済みのサンプルプランを編集することができます。編集にはパスワードが必要です。

1. メインメニューにて「プランの編集」をクリックします。

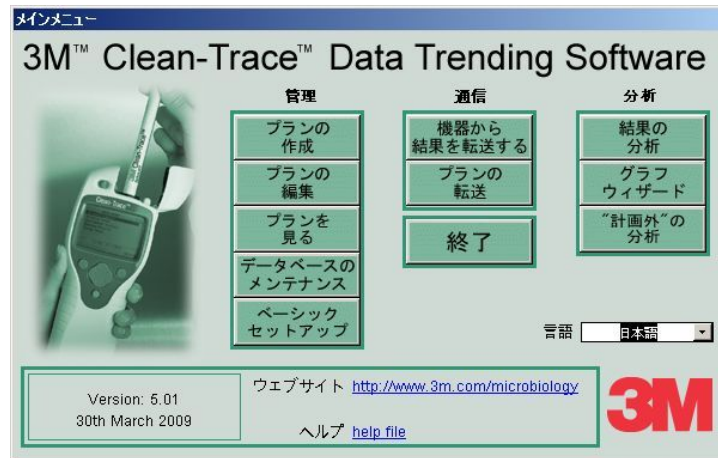

2. パスワードを入力し「OK」をクリックします。

日本語入力が ON になっているとパスワードがうまく入力できません。この場合、入力した文字数よりも「*」の数が少なく表示されます。




3. 「サンプルプランの編集」にて、リストボックスよりサンプルプランを選択します。



- ・ 3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 に転送したことがあるサンプルプランを選択した場合、「89: 計画の編集」が表示されます。

この場合、UNG3 とパソコンを接続して、UNG3 をリセットする必要があります。

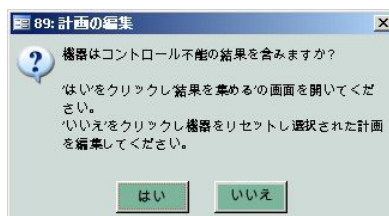


- ・ UNG3 に保存されている試験結果をパソコンに転送する場合には UNG3 とパソコンを接続した状態で「はい」をクリックします。「機器から試験結果を転送する」画面が表示され、試験結果を転送することができます。

3.3 サンプルプランの編集



- 3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 に保存されている試験結果をすでにパソコンに転送してある場合、あるいは試験結果が不要な場合には UNG3 とパソコンを接続した状態で「いいえ」をクリックします。「46: データのリセット」が表示されますので、UNG3 とパソコンを接続した状態で「はい」をクリックします。UNG3 をリセットして、選択したサンプルプランを編集することができます。

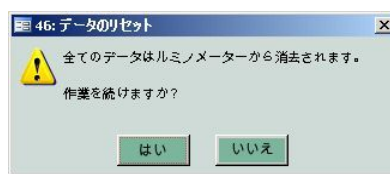

3.3.1 テストポイントを編集する


1. テストポイントの内容を上書き編集します。



2. テストポイントの順番を変更する場合は、移動したい行をクリックしてから「並び替え」の矢印をクリックします。
3. 「保存」をクリックすると、サンプルプランが保存されます。



4. 「印刷」をクリックすると、サンプルプランが印刷されます。
5. 「終了」をクリックすると、メインメニューに戻ります。変更が保存されていない場合には「4: データの保存」が表示され、「はい」をクリックすると保存されます。

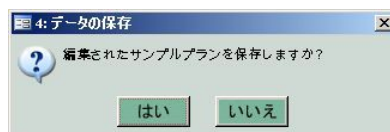

a) テストポイントの名前を変更する

1. テストポイント名を上書きして、Tab キーを押します。

3.3 サンプルプランの編集

- 略称が自動的に入力されます。


並び替え	テストポイントリスト	テストポイント	略称	部門	合格レベル	不合格レベル	スワップの種類	洗浄器具
1	テストポイント2	テス002		部門	150	300		
2				事業所				
3				食品安全市場プロジェクト 相模原事業所				

- その他の項目がリセットされますので、それぞれ入力します。

- 「保存」をクリックすると新しいテストポイントが保存されます。

既存の結果が変更されることはありません。

- 「保存」をクリックせずに他の行に移動すると「112: 結果の表のアップデート」が表示されます。「はい」をクリックすると新しいテストポイントが保存されます。

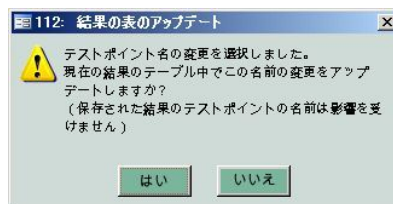

b) 衛生管理計画を変更する

- 緑色の「MSS」ボタンをクリックします。
- 「衛生管理計画」を編集します。

3.3.2 テストポイントを追加する

- 「サンプルプランの作成」と同様の手順でテストポイントを追加します。

3.3.3 テストポイントを削除する


- 削除したいテストポイントの行にカーソルを移動するか、クリックします。
- 「テストポイント削除」をクリックします。

並び替え	テストポイントリスト	テストポイント	略称	部門	合格レベル	不合格レベル	スワップの種類	洗浄器具
1	テストポイント	テス001			100	200	ATP	
2								
3								

- パスワードを入力して「OK」をクリックします。

- 「はい」をクリックするとテストポイントが削除されます。既存の結果が変更されることはありません。

3.3 サンプルプランの編集

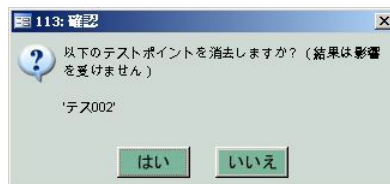


3.3.4 サンプルプランを削除する


1. リストから削除したいサンプルプランを選択します。
2. 「削除」をクリックします。



3. パスワードを入力して「OK」をクリックします。

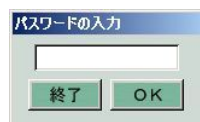

4. 「はい」をクリックするとサンプルプランが削除されます。
既存の結果が変更されることはありません。

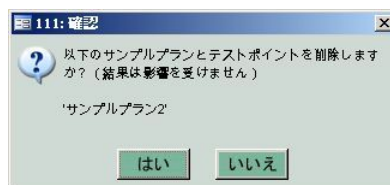


3.4 サンプルプランを見る

3.4 サンプルプランを見る

「プランを見る」では、作成済みのサンプルプランを確認することができます。このモードでは内容は変更できません。

1. メインメニューにて「プランを見る」をクリックします。

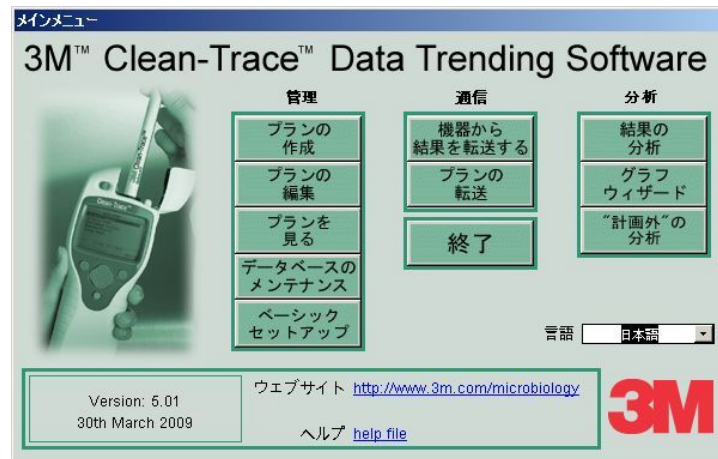

2. 「サンプルプランを見る」が表示されます。




3. リストから確認したいサンプルプランを選択します。
4. サンプルプランが表示されます。
5. 編集はできませんが、「印刷」をクリックすると印刷することができます。
6. 「終了」をクリックするとメインメニューに戻ります。

3.5 データベースのメンテナンス


3.5 データベースのメンテナンス

データベースの様々なメンテナンスを行うことができます。

1. メインメニューにて「データベースのメンテナンス」をクリックします。

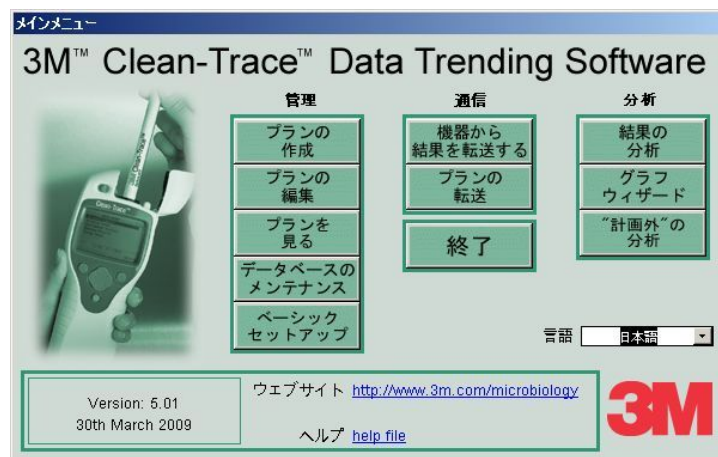

2. パスワードを入力します。
3. 「データベースのメンテナンス」が表示されます。

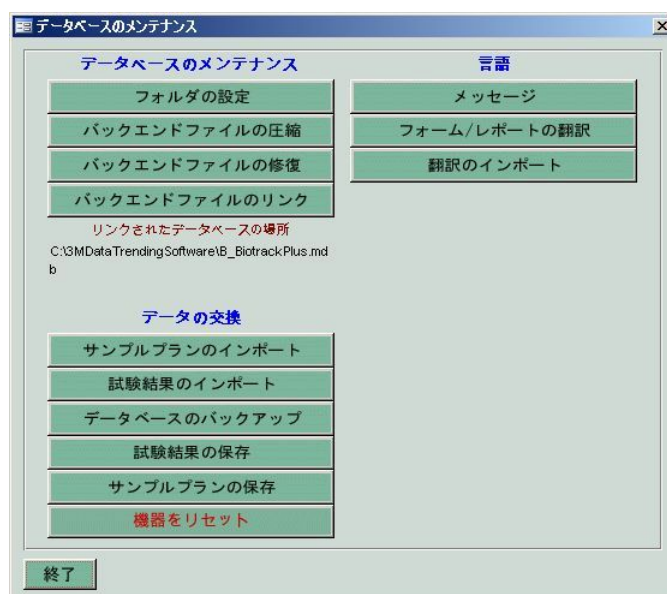

4. 必要な項目をクリックします。


3.5 データベースのメンテナンス

3.5.1 データベースのメンテナンス

a) フォルダの設定

デフォルトのフォルダを設定します。

1. 「フォルダの設定」をクリックします。

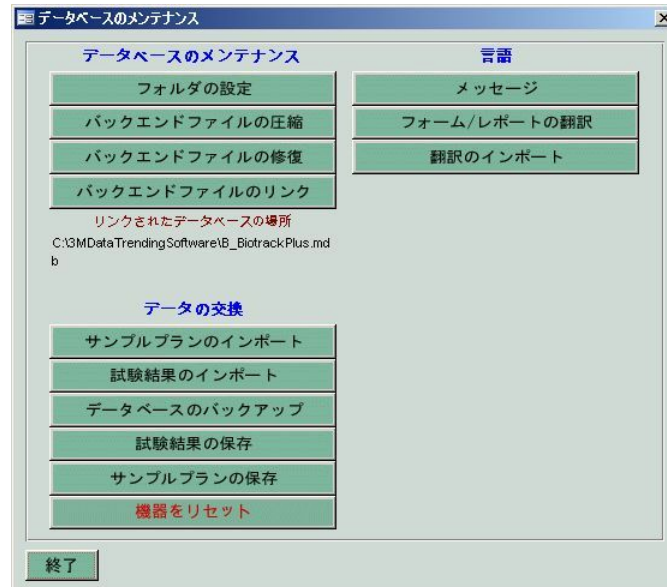

2. 「Microsoft Excel フォルダ」「テキストファイルフォルダ」「アーカイブフォルダ」「バックアップフォルダ」のいずれかを選択し、クリックします。



3. データを保存するフォルダを選択して「開く」をクリックします。
4. 全てのフォルダを設定した後に「終了」をクリックすると「データベースのメンテナンス」に戻ります。

3.5 データベースのメンテナンス

マイクロソフトエクセルフォルダ

「結果の分析」の「データエクスポート」タブから、データを Microsoft Excel 形式に出力することができます。

テキストファイルフォルダ


「結果の分析」の「データエクスポート」タブから、データをテキストファイルに出力することができます。

アーカイブフォルダ

「データベースのメンテナンス」の「試験結果の保存」からデータのアーカイブファイルを出力することができます。

バックアップフォルダ

「データベースのメンテナンス」の「データベースのバックアップ」から保存することができます。

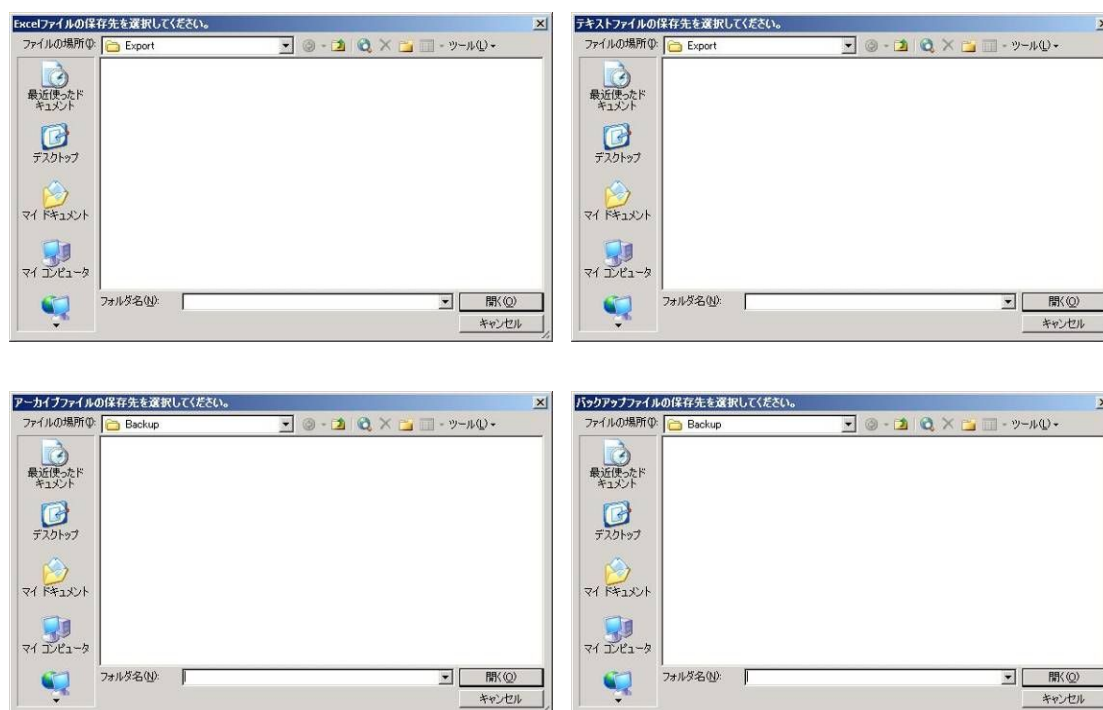


3.5 データベースのメンテナンス

b) バックエンドファイルの圧縮


バックエンドデータベース（結果のデータベース＝” BiotrackPlus_B.mdb” ）を自動的に圧縮します。バックエンドデータベースには全てのデータが保存されるため、ファイルのサイズが次第に大きくなってしまいます。データベースのサイズをコンパクトにして多くのデータを保存できるようにします。

1. 「バックエンドファイルの圧縮」をクリックします。


バックエンドデータベースの圧縮は、1 ユーザーのみがログインした状態でおこなってください。

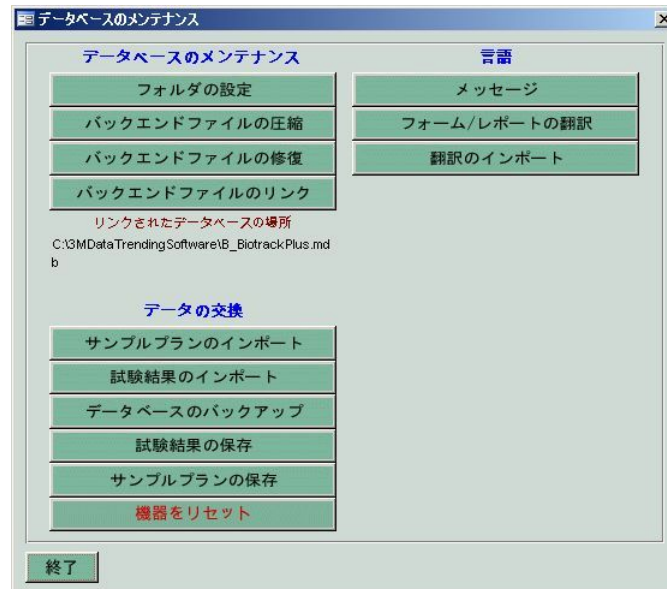

2. 「OK」をクリックします。

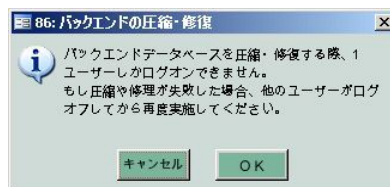

3. 「OK」をクリックします。

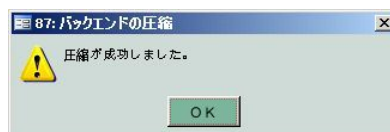


3.5 データベースのメンテナンス

c) バックエンドファイルの修復


バックエンドデータベース（結果のデータベース＝” BiotrackPlus_B.mdb”）を自動的に修復します。バックエンドデータベースには全てのデータが保存されるため、データが破損してしまう可能性があります。バックエンドリペアは、データベースの修復を試みます。

1. 「バックエンドファイルの修復」をクリックします。


バックエンドデータベースの圧縮は、1 ユーザーのみがログインした状態でおこなってください。

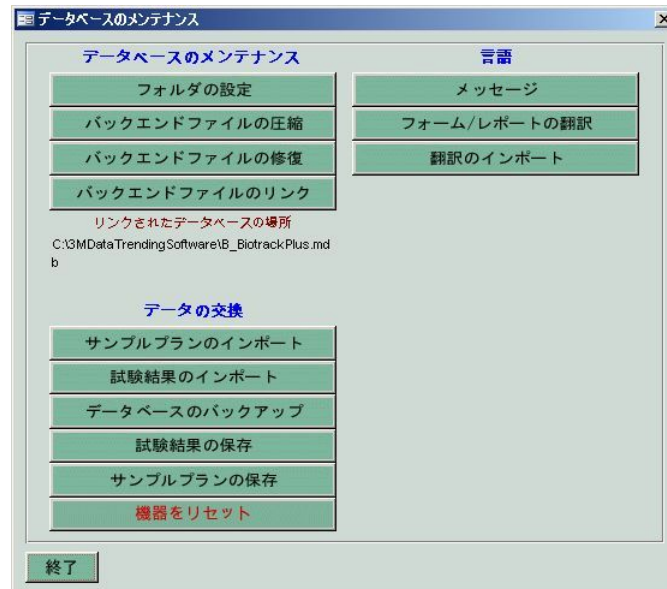

2. 「OK」をクリックします。

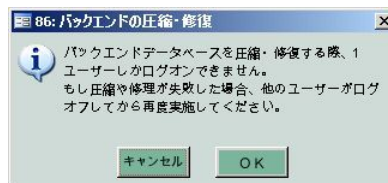

3. 「OK」をクリックします。

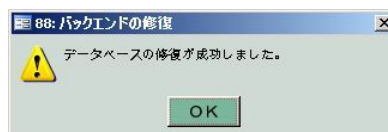

3.5 データベースのメンテナンス


d) バックエンドファイルのリンク

使用するバックエンドデータベース（結果のデータベース＝” BiotrackPlus_B.mdb” ）を指定します。通常は” C:\¥ 3 MDataTrendingSoftware” にあるバックエンドデータベースを使用しますが、例えばバックエンドデータベースをネットワークドライブに移動し、そのデータベースを使用することもできます。すると、複数のフロントエンドデータベース（ソフトウェア本体＝ “BiotrackPlus_F.mdb”）から同じバックエンドデータベースを扱うことができるようになります。

あらかじめ、バックエンドデータベースを他の場所に移動もしくはコピーしておく必要があります。

バックエンドデータベースの場所の指定

2. 「データベースのメンテナンス」にて「バックエンドファイルのリンク」をクリックします。

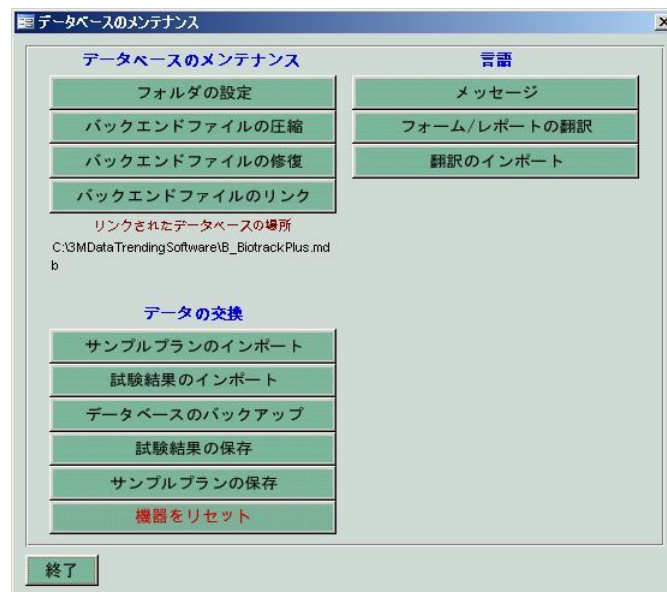


3. バックエンドデータベースを選択して「開く」をクリックします。



- ・ バックエンドデータベース以外のファイルを選択した場合には「78: 表と関連付けられたエラー」が表示されます。

3.5 データベースのメンテナンス

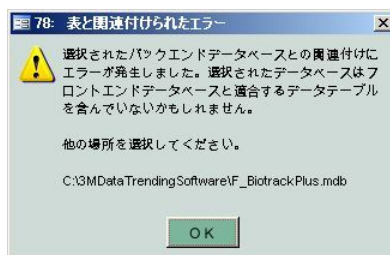

4. 「OK」をクリックします。



5. 「リンクされたデータベースの場所」が変更されたことを確認します。




3.5 データベースのメンテナンス

3.5.2 データのインポート・エクスポート

a) サンプルプランとテストポイントのインポート

保存してあるサンプルプランとテストポイントをインポートすることができます。

1. 「データベースのメンテナンス」にて「サンプルプランのインポート」をクリックします。

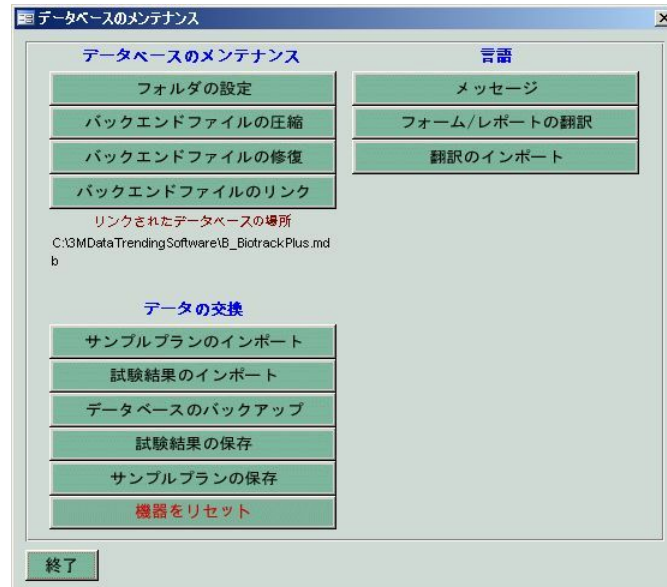

2. インポートしたいサンプルプランとテストポイントのファイル (*.mdb) を選択して「開く」をクリックします。




3. インポートしたいサンプルプランにチェックを入れた状態で「インポート」をクリックします。



4. 「OK」をクリックします。

3.5 データベースのメンテナンス

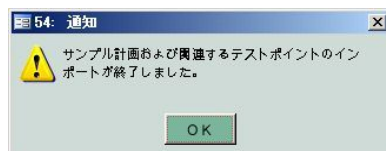

インポートしたいサンプルプラン名が既存のサンプルプラン名と重複している場合

1. 「OK」をクリックします。



2. 重複しているサンプルプラン名と略称の右側に「×」印が表示されており、「インポート」のチェックボックスがチェックされていない状態になります。




3. サンプルプランをインポートする前に既存のサンプルプラン名と略称を変更する必要があります。
「終了」をクリックしてメインメニューに戻り、「プランの編集」にて既存のサンプルプラン名と略称を変更します。
4. 上記の手順を再度実行すると、「×」印が消え、「インポート」のチェックボックスが自動的にチェックされた状態となり、インポートすることができます。

3.5 データベースのメンテナンス

b) 試験結果のインポート

保存してある試験結果をインポートすることができます。

1. 「データベースのメンテナンス」にて「試験結果のインポート」をクリックします。

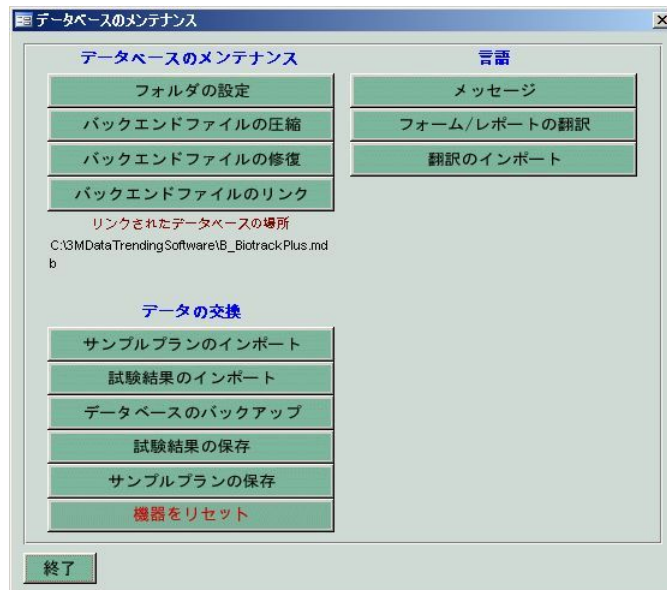

2. インポートしたいファイル (*.mdb) を選択し、「開く」をクリックします。



3. インポートできるデータ数が表示されます。「インポート」をクリックします。



4. 「OK」をクリックします。



3.5 データベースのメンテナンス

サンプルプラン名、略称、日時が重複したデータはインポートされません。インポートできるデータがない場合やデータがすでに読み込まれている場合には「108:注意」「90: 記録の複製」が表示されます。




3.5 データベースのメンテナンス


c) データベースのバックアップ

データベースをバックアップすることができます。

1. 「データベースのメンテナンス」にて「データベースのバックアップ」をクリックします。

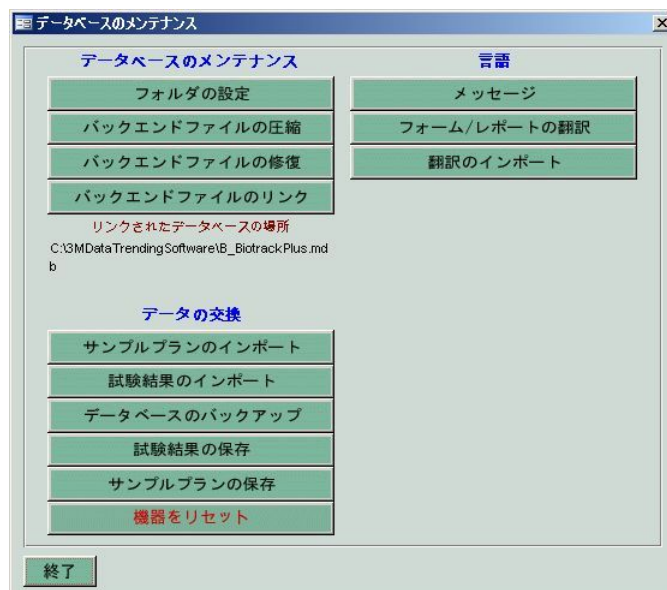

2. 「はい」をクリックします。

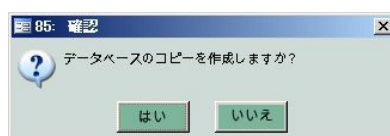

3. 「OK」をクリックします。



4. データベースは「データベースのメンテナンス」で設定した「バックアップフォルダ」に保存されます。




3.5 データベースのメンテナンス

d) 試験結果の保存

一定期間の試験結果を保存することができます。

1. 「データベースのメンテナンス」にて「試験結果の保存」をクリックします。

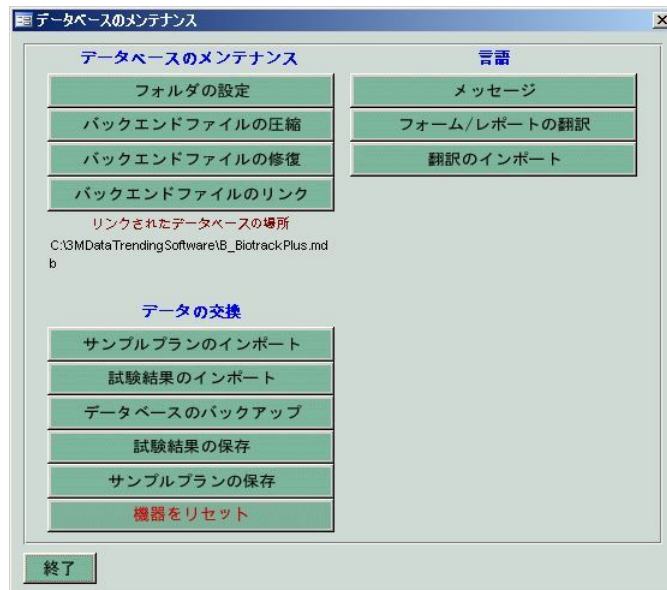

2. 保存するデータの期間を yyyy/mm/dd の形式にて入力し、Enter キーもしくは Tab キーを押します。



3. ファイル名が自動的に表示されます。必要に応じてファイル名を変更して「保存」をクリックします。



4. 「はい」をクリックします。



3.5 データベースのメンテナンス

5. ファイルは「データベースのメンテナンス」で設定した「アーカイブフォルダ」に保存されます。
データは、マスターデータベース（ソフト上で扱っているデータ=B_BiotrackPlus.mdb）から削除されます。
6. 「OK」をクリックします。




3.5 データベースのメンテナンス


e) サンプルプランの保存

サンプルプランを保存することができます。


1. 「データベースのメンテナンス」にて「サンプルプランの保存」をクリックします。

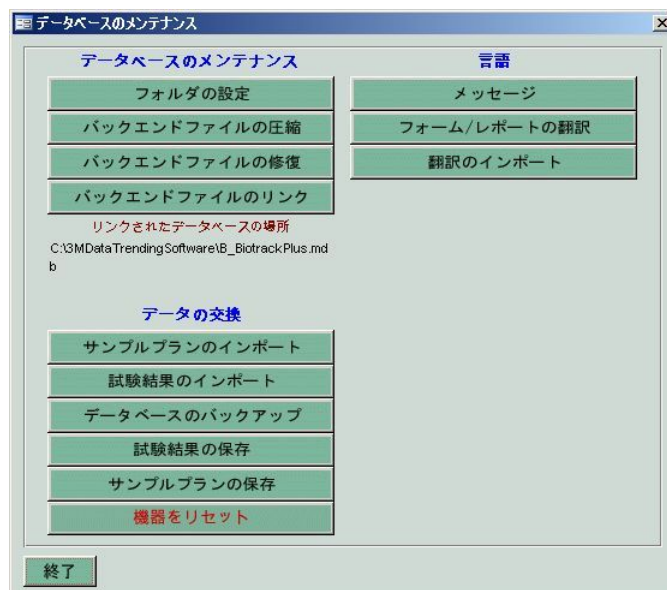


2. 保存したいサンプルプランを選択します。

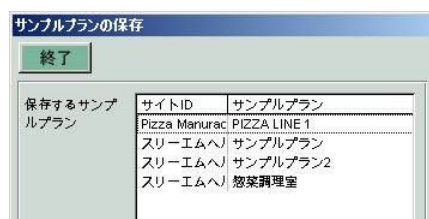

3. ファイル名が自動的に表示されます。必要に応じてファイル名を変更して「保存」をクリックします。

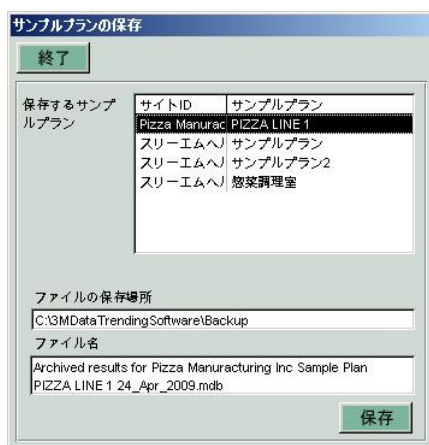

4. 「はい」をクリックします。

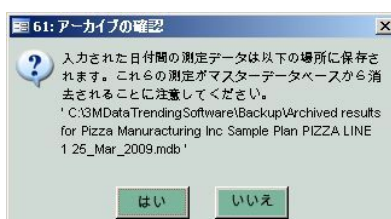

3.5 データベースのメンテナンス

5. ファイルは「データベースのメンテナンス」で設定した「アーカイブフォルダ」に保存されます。
測定結果は、マスターデータベース（ソフト上で扱っているデータ=B_BiotrackPlus.mdb）から削除されます。
6. 「OK」をクリックします。




3.5 データベースのメンテナンス


f) 機器のリセット

3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 保存されたデータ（サンプルプラン、テストポイント、測定結果など）をリセットすることができます。

1. 「データベースのメンテナンス」にて「機器をリセット」をクリックします。

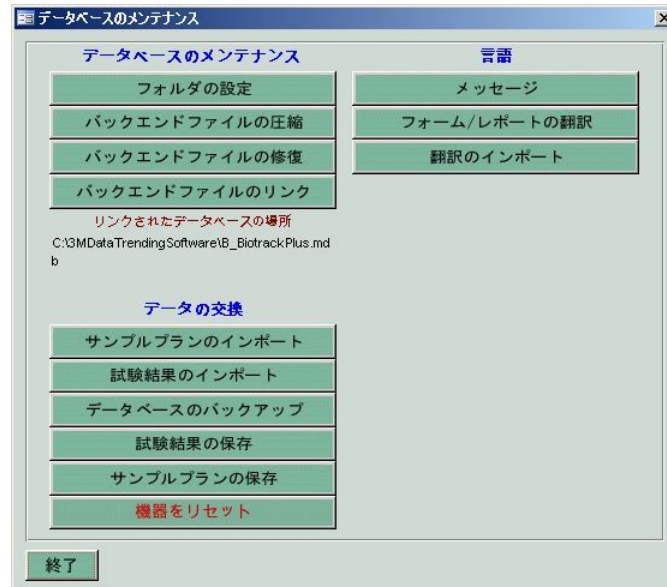

2. UNG3 から必要なデータを転送してあり、残っているデータを消去してもよければ「はい」をクリックします。

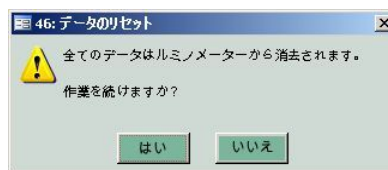

3.5.3 言語

a) メッセージ

通常は使用しません。

b) フォーム/レポートの翻訳

通常は使用しません。

c) 翻訳のインポート

通常は使用しません。


4.1 サンプルプランの転送

4. 通信

4.1 サンプルプランの転送

3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 にサンプルプランを転送します。

1. UNG3 とパソコンを接続し、電源を入れます。
2. メインメニューにて「プランの転送」をクリックします。「通信状況のチェック」と表示された後に「機器にサンプルプランを転送する」が表示されます。

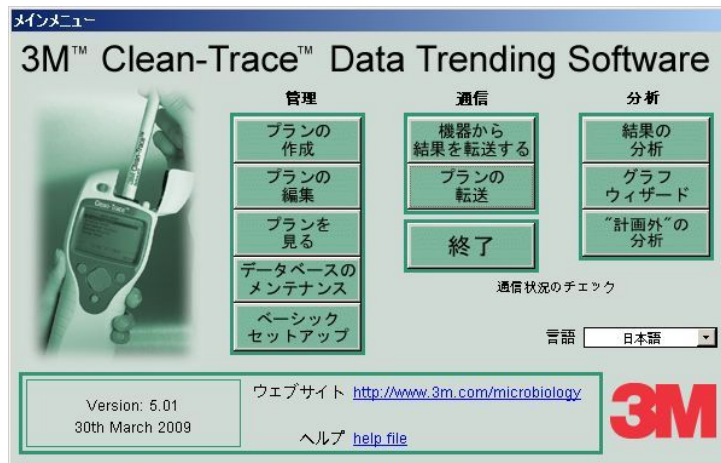

3. リストボックスから転送するサンプルプランを選択します。



- ・ 複数のサンプルプランをクリックすると、まとめて選択することができます。
- ・ 間違えて選択した場合には、右クリックもしくは左クリックにて解除できます。
- ・ 「クリア」をクリックすると、全ての選択を解除できます。

4. 「転送」をクリックします。UNG3 にプランが転送されます。




5. UNG3 をパソコンから切り離します。試験の準備が整いました。

4.2 試験結果の転送

4.2 試験結果の転送

3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 からパソコンに試験結果を転送します。

1. UNG3 とパソコンを接続し、電源を入れます。
2. メインメニューにて「機器から結果を転送する」をクリックします。「通信状況のチェック」と表示された後に「機器から試験結果を転送する」が表示されます。

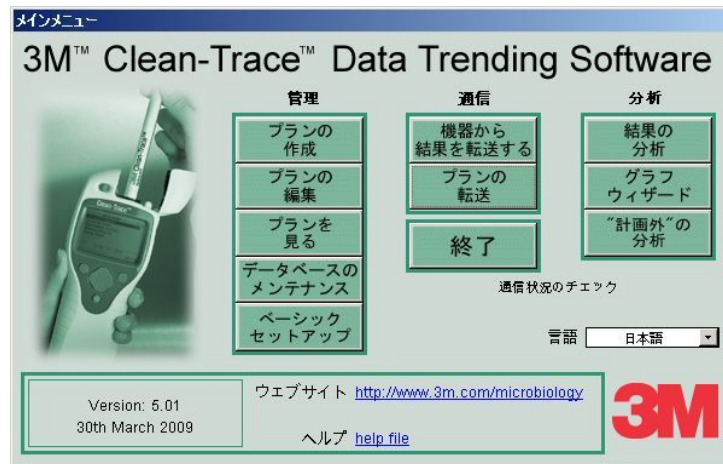

3. リストボックスから転送するサンプルプランを選択します。



- ・ 複数のサンプルプランをクリックすると、まとめて選択することができます。
- ・ 間違えて選択した場合には、右クリックもしくは左クリックにて解除できます。
- ・ 「クリア」をクリックすると、全ての選択を解除できます。

4. 「転送する」をクリックします。UNG3 から試験結果が転送されます。



5. UNG3 をパソコンから切り離します。


5.1 結果の分析

5. 分析

5.1 結果の分析

収集したデータを分析し、レポートを作成することができます。

1. メインメニューにて「結果の分析」をクリックします。

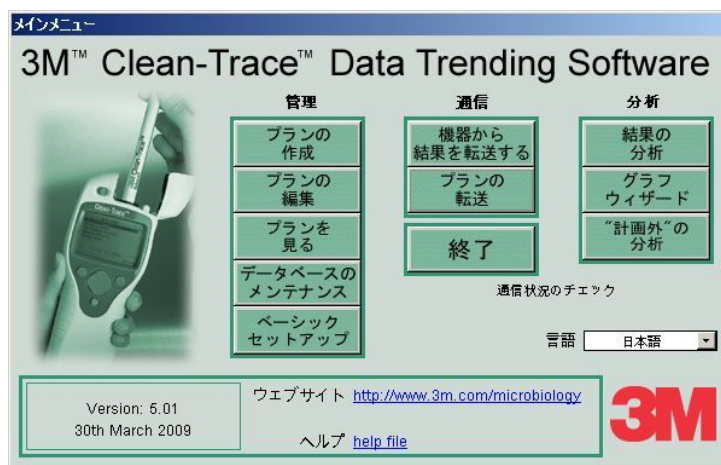

5.1.1 結果の表

3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 から転送されたデータは「結果の表」から確認することができます。



全ての再試験結果を確認する場合は、該当する行のいずれかの列をダブルクリックします。



5.1 結果の分析

a) 結果の表から確認できる項目

フラグ	ソフトウェア上でデータを追加・編集したことを表します。
日時	試験を開始した日時を表します。通常は「テスト日時」と同じです。
テスト日時 (試験日時)	1回目の試験の日時を表します。通常は「日時」と同じです。
サンプルプラン	
テストポイント	
合格レベル	
不合格レベル	
試験結果	1回目の試験結果を表します。
試験結果判定	1回目の試験の判定（合格/注意/不合格）を表します。
試験コメント	「結果の分析」の「データの追加」にて入力できるコメントです。
再試験日時	再試験の日時を表します。結果の表には表示されず、結果の表の該当する行をダブルクリックすると表示されます。
再試験結果	再試験の結果を表します。再試験を複数回実施した場合には、結果の表には最終回の結果のみが表示されます。途中の再試験結果は、結果の表の該当する行をダブルクリックすると表示されます。
再試験判定	再試験の判定（合格/注意/不合格）を表します。
再試験コメント	「結果の分析」の「データの追加」にて入力できるコメントです。
年月	日時の値を元に自動的に入力されます。 例) 2009 03
年	日時の値を元に自動的に入力されます。 例) 2009
月	日時の値を元に自動的に入力されます。 例) Jan、Feb、Mar
曜日	日時の値を元に自動的に入力されます。 例) Mon、Tue、Wed

5.1 結果の分析

略称	サンプルプランの略称（英数半角 8 文字）を表します。
使用者	「ベーシックセットアップ」の「機器のセットアップ」において機器のユーザーを設定し、「ユーザーパスワードを使用する」にチェックし、「ユーザーの入力を省略する」のチェックを外した場合に、測定時に 3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 で選択したユーザー名を表します。
サイト ID	
事業所	
部門	
管理者	
製品	「ベーシックセットアップ」の「機器のセットアップ」において「製品名を入力する」にチェックを入れた場合に、測定時に UNG3 に入力した製品名を表します。
バッチ	
スワブの種類	
洗浄剤	
洗浄方法	
洗浄器具	
UD1	
UD2	
UD3	
UD4	
衛生管理担当者	

5.1 結果の分析

5.1.2 結果の表にフィルタをかける

日付およびデータによってフィルタをかけることができます。フィルタをかけたデータをもとに、レポートとグラフの作成と印刷、テキストファイル(.txt)あるいはMicrosoft Excel ファイル(.xls)へエクスポートなどをおこないます。

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格し	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	?
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	?
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	?

a) 日付によるフィルタ

1. 「日付によるフィルタ」に、表示したい期間（開始日と終了日）を yyyy/mm/dd の形式で入力し、Enter キーもしくは Tab キーを押します。あるいは「直近数か月分」の機能を利用します。

- ・ フィルタに含めたい過去の月数（1、2、3、6、12、24、全て）をクリックします。
- ・ 「有効にする」のチェックボックスにチェックが入ります。
- ・ 結果の表にフィルタがかかります。
- ・ 項目別のフィルタ（下記参照）はリセットされます。併用する場合には日付によるフィルタをかけてから項目別のフィルタをかけてください。

b) 項目別のフィルタ

1. 「フィルタをかける項目」のドロップダウンリストからフィルタをかける項目を選択します。「選択できるデータ」リストに利用可能なデータが表示されます。

5.1 結果の分析

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

2. 「選択できるデータ」リストから必要なデータを選択します。
 - ・ 1つのデータを選択する場合：クリックします。
 - ・ 一定範囲のデータを選択する場合：一番上の行をクリックしてから、Shift キーを押しながら一番下の行をクリックします。
 - ・ 複数のデータを選択する場合：Ctrl キーを押しながらそれぞれの行をクリックします。
3. 必要なデータを「選択されたデータ」に移動します。
 - ・ 「>」をクリックすると、選択したデータがまとめて移動します。
 - ・ 「>>」をクリックすると、全てのデータがまとめて移動します。
 - ・ 「<」「<<」をクリックすると、選択されたデータを同様の手順で元に戻すことができます。

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input checked="" type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

4. 「選択されたデータの表示/非表示」によって、選択されたデータを表示するか表示しないかを切り替えることができます。
5. 「フィルタを適用」をクリックするとフィルタが適用されます。日付によるフィルタはリセットされません。

5.1 結果の分析

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2008/05/01 9:52:00	2008/05/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/05/02 9:52:00	2008/05/02 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/05/03 9:52:00	2008/05/03 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	5

c) フィルタの保存

設定したフィルタ（日付のフィルタを含む）を保存することができます。

1. 「フィルタの保存」をクリックします。
2. フィルタの名称を入力して「OK」をクリックします。

3. 「はい」をクリックします。

d) フィルタを見る

保存されているフィルタのコードを確認することができます。

1. 「フィルタを見る」をクリックします。

説明	フィルタ
コンベア	{(Test Point) in ("CONVEYOR BELT 1","CONVEYOR BELT 2","CONVEYOR BELT 3","CONVEYOR BELT 4")}

2. 「終了」をクリックします。

e) 保存されたフィルタの適用

保存されているフィルタを適用することができます。

1. 「保存されたフィルタの適用」のドロップダウンリストからフィルタを選択します。

5.1 結果の分析

2. フィルタが適用されます。日付によるフィルタはリセットされます。

f) データのリセット

フィルタをリセットして、サンプルプランの全ての結果を再表示します。測定結果の数は、画面下部の「レコード」部分に表示されます。

<input type="checkbox"/>	2007/10/01 9:48:00	2007/10/01 9:48:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2007/11/01 9:48:00	2007/11/01 9:48:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2007/12/01 9:48:00	2007/12/01 9:48:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/01/01 9:52:00	2008/01/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/02/01 9:52:00	2008/02/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	6
<input type="checkbox"/>	2008/03/01 9:52:00	2008/03/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/04/01 9:52:00	2008/04/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	5
<input type="checkbox"/>	2008/05/01 9:52:00	2008/05/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	6

g) レイアウト保存

列幅などのレイアウトを保存することができます。

h) 試験結果の一覧

フィルタをかけた結果の一覧をレポートとして印刷します。

5.1 結果の分析

5.1.3 カラムを隠す/表示する

結果の一覧のうち不要な項目を非表示にすることができます。

「ディスプレイ」の項目のチェックボックスを外すと、その項目が非表示となります。

- ・ 「ディスプレイ」のカラムのチェックボックスを外すと、その項目が非表示となります。
- ・ 「ディスプレイ」のカラムのチェックボックスをチェックすると、項目は再度表示されます。
- ・ 「全てのフィールドを表示」をクリックすると、全ての項目が表示されます。

Filter applied: 'コンベア'

結果の表にフィルタをかける カラムを隠す/表示する データの編集 データの追加 データのエクスポート レポート 印刷/衛生管理を見る

終了 表示したい項目を選択してください。 全てのフィールドを表示

項目	表示
日時	<input checked="" type="checkbox"/>
テスト日時	<input checked="" type="checkbox"/>
サンプルプラン	<input checked="" type="checkbox"/>
テストポイント	<input checked="" type="checkbox"/>
合格レベル	<input checked="" type="checkbox"/>
不合格レベル	<input checked="" type="checkbox"/>
試験結果	<input checked="" type="checkbox"/>
試験結果判定	<input checked="" type="checkbox"/>
試験コメント	<input checked="" type="checkbox"/>
両方の結果をみる	<input checked="" type="checkbox"/>

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格レ	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2008/05/01 9:52:00	2008/05/01 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/02 9:52:00	2008/05/02 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/03 9:52:00	2008/05/03 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input checked="" type="checkbox"/>	2008/05/04 9:52:00	2008/05/04 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/05 9:52:00	2008/05/05 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/06 9:52:00	2008/05/06 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/07 9:52:00	2008/05/07 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/08 9:52:00	2008/05/08 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/09 9:52:00	2008/05/09 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/10 9:52:00	2008/05/10 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/11 9:52:00	2008/05/11 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/12 9:52:00	2008/05/12 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/13 9:52:00	2008/05/13 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/14 9:52:00	2008/05/14 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/15 9:52:00	2008/05/15 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/16 9:52:00	2008/05/16 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	
<input type="checkbox"/>	2008/05/17 9:52:00	2008/05/17 9:52:00	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	150	300	

レコード: 1 / 75

5.1 結果の分析

5.1.4 データの編集

結果の表のデータを編集します。

編集したデータには「フラグ」がつけられ、監査証跡（Audit Trail）として保存されます。

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

「データの追加」が「オフ」の状態ではデータを追加することはできませんが、「監査証跡のプレビュー」から結果の一覧を確認したり印刷したりすることができます。

a) データを編集する

1. 「データの編集」のチェックボックスを「オン」にします。
2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。

パスワードの入力

終了 OK

3. データを編集します。

5.1 結果の分析

b) 編集が可能な項目

フラグ	○	年月	△	洗浄剤	×
日時	○	年	△	洗浄方法	×
テスト日時	○	月	△	洗浄器具	×
サンプルプラン	×	曜日	△	UD1	○
テストポイント	×	略称	△	UD2	○
合格レベル	×	使用者	×	UD3	○
不合格レベル	×	サイト ID	×	UD4	○
試験結果	○	事業所	×	衛生管理担当者	×
試験結果判定	△	部門	×		
試験コメント	○	管理者	×		
再試験結果	○	製品	×		
再試験判定	△	バッチ	×		
再試験コメント	○	スワブの種類	×		


○：編集可能、△：自動的に変更、×：変更不可

c) 再試験結果の追加と編集

再試験の結果を結果の表に直接入力することはできません。



- 追加と編集が必要な行（データが入力されている部分）をダブルクリックします。

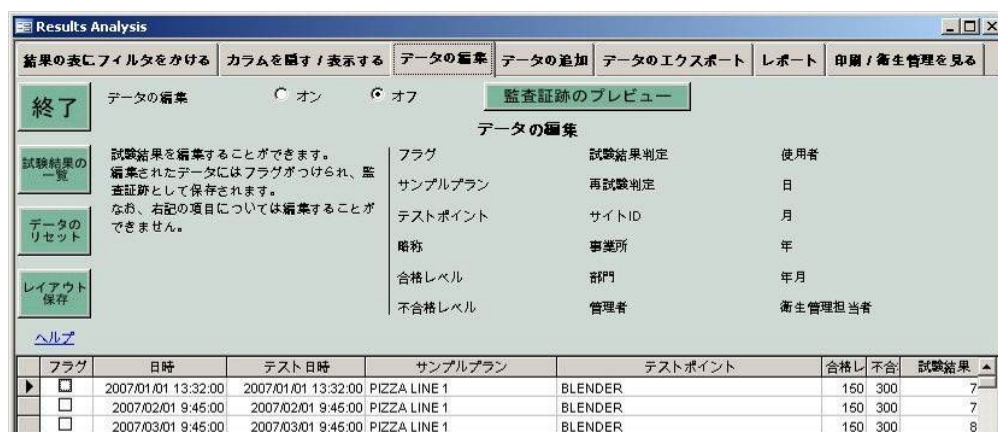

- 「再試験結果」が表示されます。

5.1 結果の分析

再試験結果を追加する

1. 「再試験の結果を追加」をクリックします。

2. 必要に応じて日時を変更します。
3. 「再試験結果」を入力します。「再試験判定」が自動的に入力されます。

4. 「OK」をクリックします。

5. 複数の再試験結果を保存する場合には、同様の手順を繰り返します。

再試験結果を編集する

1. 編集したい再試験結果の行の黄色いボタンをクリックします。

5.1 結果の分析

2. 再試験結果を入力します。

3. 「OK」をクリックします。「再試験判定」が自動的に入力されます。

再試験結果を削除する

上記の手順で追加した再試験結果を削除することができます。

1. 編集したい再試験結果の行の黄色いボタンをクリックします。

2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。

3. 「はい」をクリックします。


なお、3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 から転送された再試験の結果は削除することができません。

5.1 結果の分析

d) 監査証跡のプレビュー

「データの編集」「データの追加」によって編集されたデータは、監査証跡（Audit Trail）として記録されます。印刷やファイルへの出力が可能です。

1. 「監査証跡のプレビュー」をクリックします。

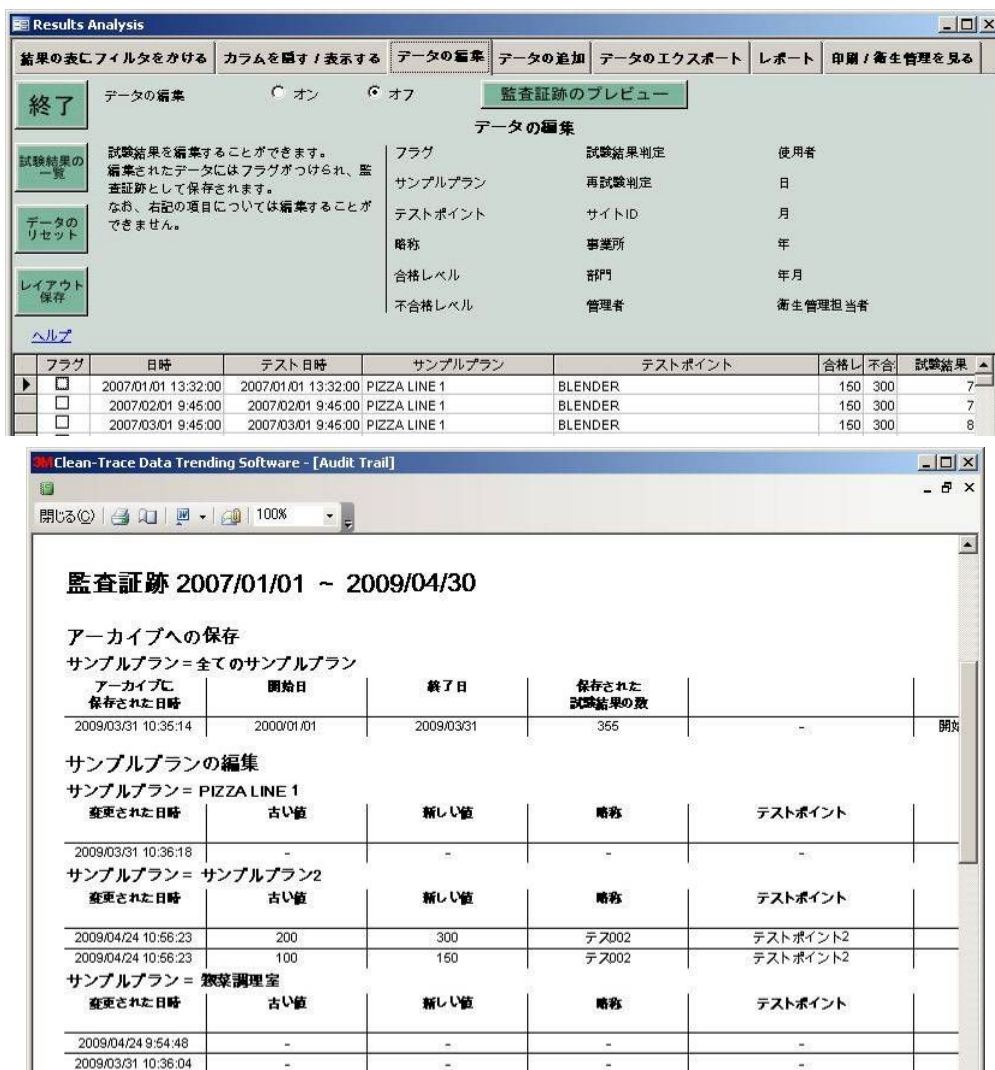

Results Analysis

結果の表にフィルタをかける | カラムを隠す / 表示する | データの編集 | データの追加 | データのエクスポート | レポート | 印刷 / 衛生管理を見る

終了 | データの編集 | オン | オフ | **監査証跡のプレビュー**

試験結果の一覧 | データのリセット | レイアウト保存 | ヘルプ

試験結果を編集することができます。
編集されたデータにはフラグがつけられ、監査証跡として保存されます。
なお、右記の項目については編集することができません。

フラグ	サンプルプラン	テストポイント	試験結果判定	再試験判定	使用者
合格レベル	略称	事業所	日	月	年
不合格レベル	合格レベル	部門	年月	衛生管理担当者	

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

Clean-Trace Data Trending Software - [Audit Trail]

閉じる | 100%

監査証跡 2007/01/01 ~ 2009/04/30

アーカイブへの保存
サンプルプラン = 全てのサンプルプラン

アーカイブに保存された日時	開始日	終了日	保存された試験結果の数		
2009/03/31 10:35:14	2009/01/01	2009/03/31	355	-	開始

サンプルプランの編集
サンプルプラン = PIZZA LINE 1

変更された日時	古い値	新しい値	略称	テストポイント
2009/03/31 10:36:18	-	-	-	-

サンプルプラン = サンプルプラン2

変更された日時	古い値	新しい値	略称	テストポイント
2009/04/24 10:56:23	200	300	テスト02	テストポイント2
2009/04/24 10:56:23	100	150	テスト02	テストポイント2

サンプルプラン = 検査調理室

変更された日時	古い値	新しい値	略称	テストポイント
2009/04/24 9:54:48	-	-	-	-
2009/03/31 10:36:04	-	-	-	-

2. 「閉じる」をクリックすると元の画面に戻ります。（右上の×を押してウィンドウを閉じるとソフトが終了してしまいますのでご注意ください。）

5.1 結果の分析

5.1.5 データの追加

結果の表にデータを追加します。「サンプルプラン」と「日時」を選んでから、データを入力していきます。個々のデータの「日時」は変更できません。

追加したデータには「フラグ」がつけられ、監査証跡 (Audit Trail) として保存されます。

Results Analysis

結果の表にフィルタをかける カラムを隠す / 表示する データの編集 データの追加 データのエクスポート レポート 印刷 / 衛生管理を見る

データの追加 ☒ オン ☐ オフ

監査証跡のプレビュー

データの追加

試験結果を追加することができます。

必要に応じて以下の日時を変更してからテストポイントを選択してください。

複数のデータを追加する際は日時を変更してからテストポイントを選択してください。

日 月 年 時 分

30 / 04 / 2009 14 : 09

フラグ 試験結果判定 使用者

サンプルプラン 再試験判定 日

異常 サイトID 月

テストポイント 事象所 年

合格レベル 部門 年月

不合格レベル 管理者 衛生管理担当者

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

「データの追加」が「オフ」の状態ではデータを追加することはできませんが、「監査証跡のプレビュー」から結果の一覧を確認したり印刷したりすることができます。

1. 「データの追加」のチェックボックスを「オン」にします。
2. パスワードを入力して「OK」をクリックします。

パスワードの入力

終了 OK

3. 「OK」をクリックします。

38: サンプルプラン

リストからサンプルプランを選択してください。

OK

a) サンプルプランにデータを追加する

1. データを追加したいサンプルプランを、ドロップダウンリストから選択します。

Results Analysis

結果の表にフィルタをかける カラムを隠す / 表示する データの編集 データの追加 データのエクスポート レポート 印刷 / 衛生管理を見る

データの追加 ☒ オン ☐ オフ

監査証跡のプレビュー

データの追加

試験結果を追加することができます。

必要に応じて以下の日時を変更してからテストポイントを選択してください。

複数のデータを追加する際は日時を変更してからテストポイントを選択してください。

日 月 年 時 分

30 / 04 / 2009 14 : 09

フラグ 試験結果判定 使用者

サンプルプラン 再試験判定 日

異常 サイトID 月

テストポイント 事象所 年

合格レベル 部門 年月

不合格レベル 管理者 衛生管理担当者

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input type="checkbox"/>	PIZZA LINE 1						
<input type="checkbox"/>	サンプルプラン						
<input type="checkbox"/>	サンプルプラン2	01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	7
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	8

2. 「OK」をクリックします。

5.1 結果の分析




- 「デフォルト日時」を入力します。「デフォルト日時」は、自動的に結果の表の「日時」および「テスト日時」として使用されます。

- 「テストポイント」のカラムをクリックし、ドロップダウンリストからテストポイントを選択します。


- 「日時」「テスト日時」「サンプルプラン」「合格レベル」「不合格レベル」が自動的に入力されます。

- 必要に応じて「テスト日時」を変更します。「テスト日時」は「日時」以降である必要があります。


5.1 結果の分析

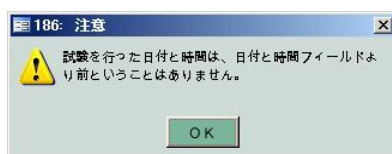

7. 「試験結果」を入力します。「試験結果判定」が自動的に入力されます。
8. 必要に応じて他のデータを入力・変更します。再試験結果を入力する場合は、下記の「再試験結果の追加と編集」の項目をご参照ください。
9. 上記 1～8 の手順を繰り返してデータを追加します。同一のテストポイントにおいて、同一の日時に複数の結果が存在してはなりません。同一のテストポイントに複数の結果を追加していく場合には、テストポイントの選択前に「デフォルト日時」を変更してください。

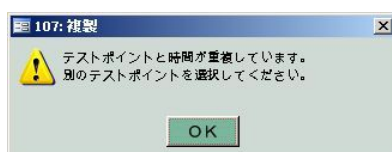

10. 各データには、日付と測定結果が最低限必要です。テストポイントと結果を入力せずに他の行に移動しようとするすると「84: 誤った記録の入力」が表示されます。また、結果を入力する前に再試験結果を入力しようとするすると「177: 注意」が表示されます。

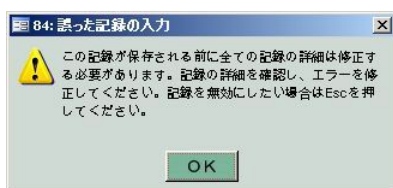


11. 全ての変更は監査証跡として保存されます。「監査証跡のプレビュー」をクリックすると確認もしくは印刷することができます。

エラーが表示されて操作できなくなってしまった場合には、Esc キーを複数回押してから、他のタブやチェックボックスをクリックして別の画面に移ってください。

b) 再試験結果の追加と編集

再試験の結果を結果の表に直接入力することはできません。また、再試験結果を入力する前に試験結果を入力し、保存しておく必要があります。

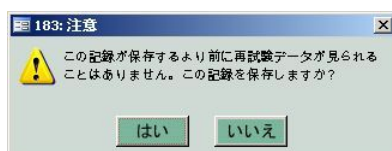


入力方法については「4) データの編集」の項目をご参照ください。

5.1.6 データのエクスポート

データを Microsoft Excel ファイルもしくはテキストファイルに出力することができます。フィルタに

5.1 結果の分析

よって画面に表示されているデータが使用されますので、必要に応じて「結果の表にフィルタをかける」メニューにてフィルタをかけてから、以下の操作をおこないます。

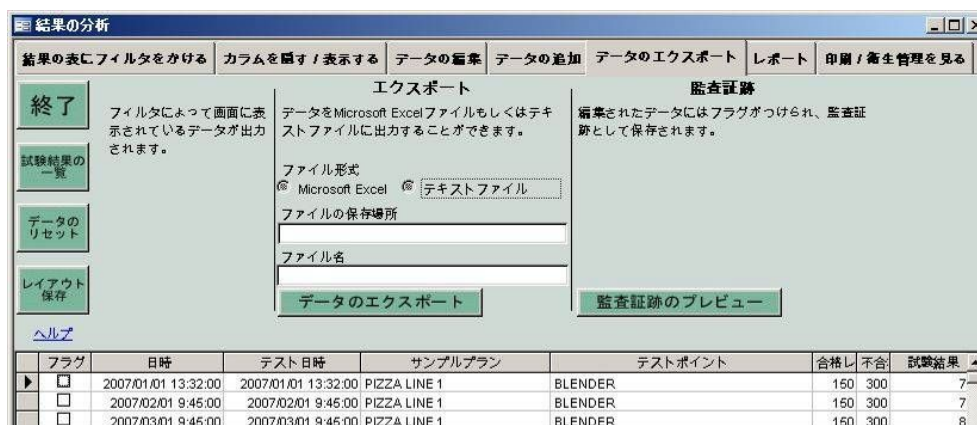

1. 「ファイル形式」を選択します。
 - ・ Microsoft Excel
 - ・ テキストファイル
2. ファイルの場所（「データベースのメンテナンス」にて設定）とファイル名が自動的に入力されます。必要に応じてファイル名を変更します。
3. 「データのエクスポート」をクリックします。



4. 出力されたファイルは Microsoft Excel もしくは他のソフトで開くことができます。

	フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格レベル	不合格レベル	試験結果	試験結果判	試験コメント	再試験結果
1											
2	FALSE	2007/1/1	2007/1/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	75	合格		
3	FALSE	2007/2/1	2007/2/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	75	合格		
4	FALSE	2007/3/1	2007/3/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	80	合格		
5	FALSE	2007/4/1	2007/4/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	76	合格		
6	FALSE	2007/5/1	2007/5/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	95	合格		
7	FALSE	2007/6/1	2007/6/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	112	合格		
8	FALSE	2007/7/1	2007/7/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	124	合格		
9	FALSE	2007/8/1	2007/8/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	140	合格		
10	FALSE	2007/9/1	2007/9/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	146	合格		
11	FALSE	2007/10/1	2007/10/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	52	合格	Polished Blender Bowl	
12	FALSE	2007/11/1	2007/11/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	54	合格		
13	FALSE	2007/12/1	2007/12/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	56	合格		
14	FALSE	2008/1/1	2008/1/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	50	合格		
15	FALSE	2008/2/1	2008/2/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	60	合格		
16	FALSE	2008/3/1	2008/3/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	54	合格		
17	FALSE	2008/4/1	2008/4/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	57	合格		
18	FALSE	2008/5/1	2008/5/1	PIZZA LINE BLENDER	BLENDER	150	300	61	合格		
19	FALSE	2007/1/1	2007/1/1	PIZZA LINE BOWL CHC	BLENDER	150	300	325	不合格		114 合
20	FALSE	2007/2/1	2007/2/1	PIZZA LINE BOWL CHC	BLENDER	150	300	644	不合格		112 合

5.1 結果の分析

5.1.7 レポート

データをレポートとして出力することができます。フィルタによって画面に表示されているデータが使用されますので、必要に応じて「結果の表にフィルタをかける」メニューにてフィルタをかけてから、以下の操作をおこないます。

a) 分析レポート

1. 表示したいレポートの種類をドロップダウンボックスより選択します。レポートのタイトルが自動的に入力されますので、必要に応じてレポートのタイトルを変更します。

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input checked="" type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	

2. 必要に応じてコメントを入力します。

フラグ	日時	テスト日時	サンプルプラン	テストポイント	合格	不合格	試験結果
<input checked="" type="checkbox"/>	2007/01/01 13:32:00	2007/01/01 13:32:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	
<input type="checkbox"/>	2007/02/01 9:45:00	2007/02/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	
<input type="checkbox"/>	2007/03/01 9:45:00	2007/03/01 9:45:00	PIZZA LINE 1	BLENDER	150	300	

3. 「レポートのプレビュー」をクリックします。
4. レポートが印刷プレビューモードで表示されます。
5. レポートを確認し、必要に応じて印刷や保存をおこないます。

5.1 結果の分析

レポートの種類

試験結果の一覧

測定結果を表として出力します。

- 日時、テストポイント、略称、合格レベル、不合格レベル、試験結果、試験結果判定、再試験結果、再試験判定、コメント

タイトル									
サイトID Pizza Manufacturing Inc サンプルプラン PIZZA LINE 1									
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/28 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	591	✗	48	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/27 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	286	?	119	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/26 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	63	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/25 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	54	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/24 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	62	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/23 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	49	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/22 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	52	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/21 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	427	✗	54	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/20 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	675	✗	114	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/19 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	54	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/18 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	61	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/17 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	71	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/16 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	47	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/15 4:51:00	FILLER HEAD 1	FILHEAD1	400	800	344	✓			
2008/05/15 4:51:00	FILLER HEAD 2	FILHEAD2	275	550	203	✓			
2008/05/15 4:51:00	FILLER HEAD 3	FILHEAD3	80	160	67	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/15 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	56	✓			
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/14 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	288	?	62	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント
2008/05/13 9:52:00	CONVEYOR BELT 1	CONVEY1	150	300	325	✗	84	✓	
日時	テストポイント	略称	合格レベル	不合格レベル	試験結果	結果判定	再試験結果	再試験判定	コメント

データの期間 : 2007/01/01 ~ 2009/04/20
印刷日時 : 2009/04/20 13:17:21

ページ 1

5.1 結果の分析

最小・最大・平均値

テストポイント毎の最小値・最大値・平均値・試験数、測定日毎の最小値・最大値・平均値・試験数を、1回目の試験と再試験について個別に出力します。

タイトル												
サイトID Pizza Manufacturing Inc サンプルラン PIZZA LINE 1												
テストポイント	試験結果						再試験結果					
	期間		最小 RLU	最大 RLU	平均 RLU	試験数	期間		最小 RLU	最大 RLU	平均 RLU	試験数
	開始日	終了日					開始日	終了日				
BLENDER	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/01/01 RLU = 50	2007/09/01 RLU = 146	80.41	17					
BOWL CHOPPER	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/03/01 RLU = 42	2007/12/01 RLU = 827	255.61	18	2007/01/01	~	2007/12/01	2007/02/01 RLU = 112	2007/12/01 RLU = 137
CHEESE MIXER	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/01/01 RLU = 54	2007/07/01 RLU = 651	199.47	17	2007/01/01	~	2007/12/01	2007/11/01 RLU = 69	2007/07/01 RLU = 141
CONVEYOR BELT 1	2008/05/01	~	2008/05/28	2008/05/09 RLU = 46	2008/05/20 RLU = 675	169.25	28	2008/05/04	~	2008/05/28	2008/05/28 RLU = 48	2008/05/27 RLU = 119
CONVEYOR BELT 2	2008/05/01	~	2008/05/06	2008/05/05 RLU = 67	2008/05/02 RLU = 585	196.40	15	2008/05/02	~	2008/05/05	2008/05/05 RLU = 67	2008/05/03 RLU = 97
CONVEYOR BELT 3	2007/03/01	~	2008/05/01	2007/05/01 RLU = 103	2007/12/01 RLU = 462	172.07	15	2007/12/01	~	2008/01/01	2008/01/01 RLU = 196	2007/12/01 RLU = 207
CONVEYOR BELT 4	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/04/01 RLU = 54	2007/07/01 RLU = 485	175.71	17	2007/03/01	~	2007/12/01	2007/12/01 RLU = 73	2007/03/01 RLU = 97
DEPOSITOR 1	2007/01/01	~	2008/05/01	2007/01/01 RLU = 40	2007/09/01 RLU = 169	84.47	17	2007/07/01	~	2007/09/01	2007/09/01 RLU = 114	2007/07/01 RLU = 124
DEPOSITOR 2	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/01/01 RLU = 48	2007/08/01 RLU = 684	188.47	17	2007/05/01	~	2008/05/01	2007/10/01 RLU = 86	2007/08/01 RLU = 227
DEPOSITOR 3	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/05/01 RLU = 34	2007/05/01 RLU = 867	233.29	17	2007/01/01	~	2007/11/01	2007/06/01 RLU = 67	2007/05/01 RLU = 126
FILLER HEAD 1	2007/01/01	~	2008/05/15	2007/06/15 RLU = 207	2007/01/01 RLU = 3683	956.10	42	2007/01/01	~	2008/03/15	2007/11/15 RLU = 305	2007/01/01 RLU = 1432
FILLER HEAD 2	2007/01/01	~	2008/05/15	2007/06/15 RLU = 67	2007/01/05 RLU = 1745	401.29	42	2007/01/01	~	2008/02/15	2007/12/01 RLU = 123	2007/01/01 RLU = 657
FILLER HEAD 3	2007/01/01	~	2008/05/15	2007/07/01 RLU = 34	2007/01/01 RLU = 478	123.36	42	2007/01/01	~	2008/02/01	2007/07/15 RLU = 47	2007/01/01 RLU = 97
MEAT SLICER 1	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/01/01 RLU = 71	2007/11/01 RLU = 643	223.29	17	2007/05/01	~	2007/11/01	2007/11/01 RLU = 43	2007/05/01 RLU = 84
MOULDER	2007/01/01	~	2008/05/01	2007/09/01 RLU = 95	2007/01/01 RLU = 465	134.47	17	2007/01/01	~	2007/01/01	2007/01/01 RLU = 127	2007/01/01 RLU = 127
SAUCE EXTRUDER 2	2007/01/01	~	2008/05/01	2008/04/01 RLU = 61	2007/08/01 RLU = 175	105.06	17		~		RLU =	RLU =
											0.00	0

試験結果												
日付	~		最小 RLU	最大 RLU	平均 RLU	試験数	再試験結果					
	最初	最後					最初	最後	最小 RLU	最大 RLU	平均 RLU	試験数
2007/01/01	BLENDER	SAUCE EXTRUDER 2	DEPOSITOR 1 rlu=40	FILLER HEAD 1 rlu=3683	630.92	13	BOWL CHOPPER	MOULDER	DEPOSITOR 3 rlu=97	FILLER HEAD 1 rlu=1432	375.43	7

データの期間 : 2007/01/01 ~ 2009/05/18
印刷日時 : 2009/05/18 13:30:45

ページ 1

5.1 結果の分析

スワブ使用数の分析

スワブの使用数（測定点数）について、1 日あたりの最小・最大・平均・合計を、1 回目の試験と再試験について個別に出力します。

タイトル

サイトID : Pizza Manufacturing Inc

サンプルプラン	試験						再試験							
	期間			1日あたり 最小試験数	1日あたり 最大試験数	1日あたり 平均試験数	全試験数	期間			1日あたり 最小試験数	1日あたり 最大試験数	1日あたり 平均試験数	全試験数
PIZZA LINE 1	2007/01/01	～	2008/05/28	2008/05/07 試験数 : 1	2008/05/01 試験数 : 17	5.22	355	2007/01/01	～	2008/05/28	2007/01/08 試験数 : 1	2007/01/01 試験数 : 7	2.09	98

データの期間 : 2007/01/01 ~ 2009/04/20

印刷日時 : 2009/04/20 13:18:25

ページ 1

5.1 結果の分析

サンプルプランレポート

テストポイントのうち、不合格が最も多かったテストポイント、注意が最も多かったテストポイント、合格が最も多かったテストポイント、試験数が最も多かったテストポイント、試験数が最も少なかったテストポイントを順番に表示します。

タイトル				
サイトID Pizza Manufacturing Inc サンプル計画 PIZZA LINE 1				
工場	Muncie IN,Saranac MI			
部門	Dough Mix,Dough Toss,Sauce Blending,Toppings Department			
管理者	Angela,Bob,Fred,Ricardo			
テストポイント数	アクティブなテストポイント = 0 : アクティブではないテストポイント = 0 : 合計 = 0			
スワブ使用数	試験に使用 = 355 : 再試験に使用 = 98 : 合計 = 453			
不合格が最も多かったテストポイント	BOWL CHOPPER	: 18 回のうち	6	不合格
	CONVEYOR BELT 1	: 28 回のうち	5	不合格
	CHEESE MIXER	: 17 回のうち	5	不合格
	MEAT SLICER 1	: 17 回のうち	4	不合格
	FILLER HEAD 3	: 42 回のうち	4	不合格
	DEPOSITOR 3	: 17 回のうち	4	不合格
	DEPOSITOR 2	: 17 回のうち	4	不合格
	FILLER HEAD 2	: 42 回のうち	3	不合格
	CONVEYOR BELT 4	: 17 回のうち	3	不合格
	CONVEYOR BELT 2	: 15 回のうち	3	不合格
	FILLER HEAD 1	: 42 回のうち	2	不合格
	CONVEYOR BELT 3	: 15 回のうち	2	不合格
	MOULDER	: 17 回のうち	1	不合格
注意が最も多かったテストポイント	FILLER HEAD 2	: 42 回のうち	18	注意
	FILLER HEAD 1	: 42 回のうち	17	注意
	FILLER HEAD 3	: 42 回のうち	8	注意
	MEAT SLICER 1	: 17 回のうち	5	注意
	DEPOSITOR 3	: 17 回のうち	4	注意
	CONVEYOR BELT 4	: 17 回のうち	4	注意
	CONVEYOR BELT 1	: 28 回のうち	4	注意
	BOWL CHOPPER	: 18 回のうち	4	注意
	SAUCE EXTRUDER 2	: 17 回のうち	3	注意
	DEPOSITOR 2	: 17 回のうち	3	注意
	DEPOSITOR 1	: 17 回のうち	2	注意
	CONVEYOR BELT 3	: 15 回のうち	2	注意
	CONVEYOR BELT 2	: 15 回のうち	2	注意
	CHEESE MIXER	: 17 回のうち	1	注意
合格が最も多かったテストポイント	FILLER HEAD 3	: 42 回のうち	30	合格
	FILLER HEAD 1	: 42 回のうち	23	合格
	FILLER HEAD 2	: 42 回のうち	21	合格
	CONVEYOR BELT 1	: 28 回のうち	19	合格
	BLENDER	: 17 回のうち	17	合格
	MOULDER	: 17 回のうち	16	合格
	DEPOSITOR 1	: 17 回のうち	15	合格
	SAUCE EXTRUDER 2	: 17 回のうち	14	合格
	CHEESE MIXER	: 17 回のうち	11	合格
	CONVEYOR BELT 3	: 15 回のうち	11	合格
	CONVEYOR BELT 2	: 15 回のうち	10	合格
	DEPOSITOR 2	: 17 回のうち	10	合格
	CONVEYOR BELT 4	: 17 回のうち	10	合格
	DEPOSITOR 3	: 17 回のうち	9	合格
	MEAT SLICER 1	: 17 回のうち	8	合格
	BOWL CHOPPER	: 18 回のうち	8	合格
試験数が最も多かったテストポイント	FILLER HEAD 3	: 42 回		
	FILLER HEAD 2	: 42 回		
	FILLER HEAD 1	: 42 回		
データの期間 : 2007/01/01 ~ 2009/04/20 印刷日時 : 2009/04/20 12:58:38				
ページ 1				

5.1 結果の分析

ランキングレポート

データを指定した方法で順番に表示することができます。

- ・ サイト ID 別、サンプルプラン別、テストポイント別
- ・ 合格、注意、不合格
- ・ 再試験結果を含める、含めない

ランキングレポート

終了

データをどのようにグループ化しますか？
 サイトID ☒ サンプルプラン ☐ テストポイント ☐

データをどのようにランク付けしますか？
 合格 ☐ 注意 ☐ 不合格 ☒

再試験結果を含めますか？
 はい ☐ いいえ ☒

コメント
 コメント

レポートのタイトル
 タイトル

レポートのプレビュー

タイトル

順位	サイトID	サンプルプラン	テストポイント	不良率
1	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	BOWL CHOPPER	33.33%
2	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	CHEESE MIXER	29.41%
3	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	DEPOSITOR 2	23.53%
4	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	DEPOSITOR 3	23.53%
5	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	MEAT SLICER 1	23.53%
6	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 2	20.00%
7	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 1	17.86%
8	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 4	17.65%
9	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	CONVEYOR BELT 3	13.33%
10	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	FILLER HEAD 3	9.52%
11	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	FILLER HEAD 2	7.14%
12	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	MOULDER	5.88%
13	Pizza Manufacturing Inc	PIZZA LINE 1	FILLER HEAD 1	4.76%

5.1 結果の分析


b) グラフ分析

グラフを作成することができます。

1. フィルタによって必要なデータのみが表示されていることを確認します。(後述の「グラフウィザード」ステップ 1 と 2 に相当します。)
2. グラフの種類をリストから選択します。
3. 「グラフウィザード」をクリックします。
4. グラフウィザードが実行され、「ステップ 3 の 3」が表示されます。

5. 「グルーピングと分類」からデータの分類方法を選択します。
6. グラフの形状をドロップダウンリストから選択します。
7. 使用するデータを「初回の測定結果のみ」「再テストの測定結果のみ」「初回と再テストの両方」のいずれかから選択します。再テストを選択した場合、再テストを測定していないグループについては、初回の測定結果が使用されます。
8. 軸のスケールを時間に比例させるかどうかを選択します。比例させる場合、試験の間隔が 2 日間であれば X 軸は 1 日間の 2 倍の間隔になります。
9. RLU 値の最小と最大の幅を設定するかを決定します。設定する場合には数値を入力します。
10. レポートのタイトルを入力もしくは変更します。タイトルは画面上には表示されず、印刷した場合のみに表示されます。
11. X 軸（通常は横軸）の名前を入力します。
12. Y 軸（通常は縦軸）の名前を入力します。チェックボックスにチェックをすると変更できます。X 軸、Y 軸の名前は画面上に表示されます。
13. 必要に応じてコメントを入力します。コメントは画面上には表示されず、印刷時に最終ページのみに表示されます。
14. 「完了」をクリックします。
15. グラフが表示されます。時間がかかる場合には進捗メーターが表示されます。

5.1 結果の分析

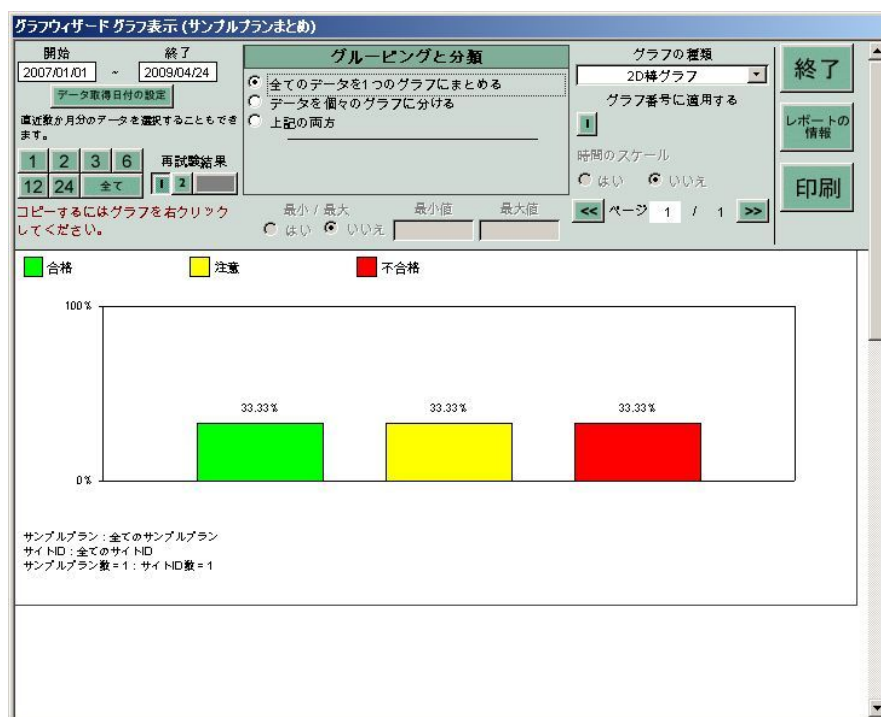

グラフ表示

「グラフウィザード」のステップ 1~3 を終了すると、グラフが表示されます。グラフは印刷することができます。

ステップ 1~3 に戻ることはできませんが、一部のデータはこの画面上で編集することができます。

- ・ 「開始」と「終了」の日付を入力してから「データ取得日付の設定」をクリックするか、「直近〇か月分」を意味する数字をクリックすると、日付の範囲を再設定することができます。
- ・ 「グルーピングと分類」のボックスから、分類方法を再設定することができます。
- ・ 「グラフの種類」のドロップダウンリストからグラフの種類を指定してから「グラフ番号に適用する」の数字をクリックすると、該当するグラフの種類を再設定することができます。複数のグラフがある場合には、個別に設定することができます。
- ・ 「<<」と「>>」をクリックするとページが移動します。
- ・ それぞれのグラフに、サイト ID、サンプルプラン、データ数などが表示されます。
- ・ 「グルーピングと分類」にて全体のグラフと個々のグラフの両方を指定した場合、全体のグラフは全てのページに表示されます。

ラベルとコメントの変更

1. 「レポートの情報」をクリックします。「レポート情報」が表示されます。
2. 必要な情報を入力します。

5.1 結果の分析

3. 「終了」をクリックします。変更が反映されます。



グラフの印刷

1. 「印刷」をクリックします。「印刷範囲」が表示されます。
2. 開始ページと終了ページを選択します。

3. 「印刷」をクリックします。

Microsoft Word へのコピー

1. 必要なグラフ上で右クリックします。「Copy Chart」ボタンが表示されます。
2. 「Copy Chart」をクリックします。Windows のクリップボードにグラフがコピーされます。
3. Microsoft Word に貼り付けます。

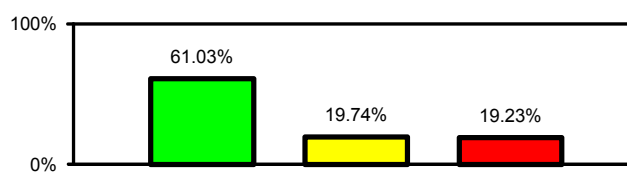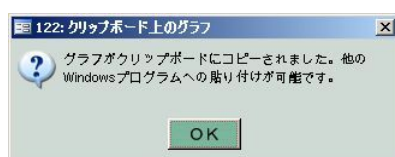

同様に、グラフをメールに添付することもできます。

「終了」をクリックすると「メインメニュー」に戻ります。

5.1 結果の分析

グラフの種類

種類	活用しやすいケース
サンプルプラン まとめ サンプルプラン別トレンド サンプルプラン別 RLU 範囲	ある店舗や工場で複数のサンプルプランを試してその効果を確認したい場合。
テストポイントまとめ テストポイント別トレンド テストポイント別トレンド総合 テストポイント別 RLU 範囲	単独の店舗や工場においてテストポイント毎の詳細を分析したい場合。
サイト ID まとめ サイト ID 別トレンド サイト ID 別 RLU 範囲	各地の店舗や工場をまとめて管理している場合。

サンプルプランまとめ

- 各サンプルプランの合格/注意/不合格の割合を表し、清浄度の確認に適します。

例) サンプルプランに不合格が多い→基準値設定や衛生管理の運用に問題がある可能性。



5.1 結果の分析

サンプルプラン別トレンド

- 各サンプルプランの合格/注意/不合格の傾向を表します。


例) 月の後半に不合格が目立つ→定期清掃の頻度が不十分な可能性。



サンプルプラン別 RLU 範囲

- 各サンプルプランの試験結果の幅を示します。

例) バラツキが大きい→何らかの不具合がある可能性。

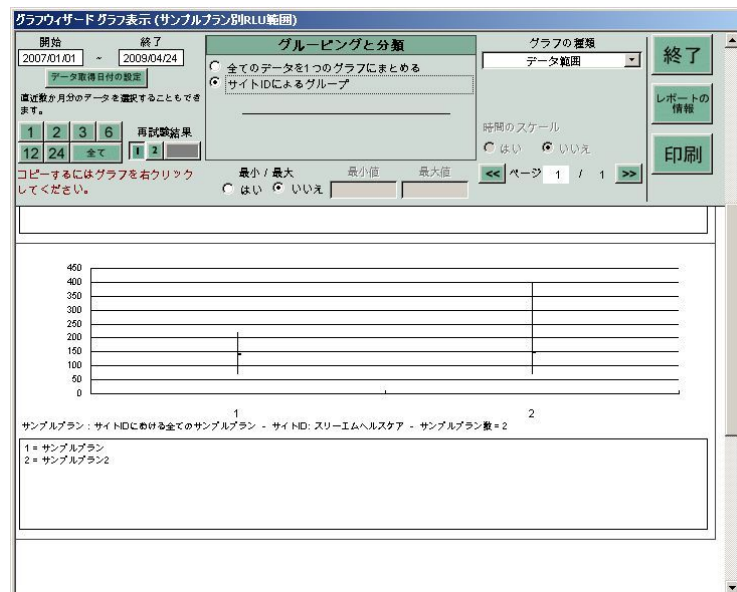

5.1 結果の分析

テストポイントまとめ

- 各テストポイントの合格/注意/不合格の割合を表し、清浄度の確認に適します。


例) あるテストポイントの不合格が多い→作業上の不都合など慢性的な問題がある可能性。



テストポイント別トレンド

- 各テストポイントの試験結果の傾向を表し、清浄度のトレンドの確認に適します。
- グラフには、合格レベル/不合格レベルの変更も反映されます。


例) あるテストポイントの数値が全体的に下がっている→改善の傾向が見られる。

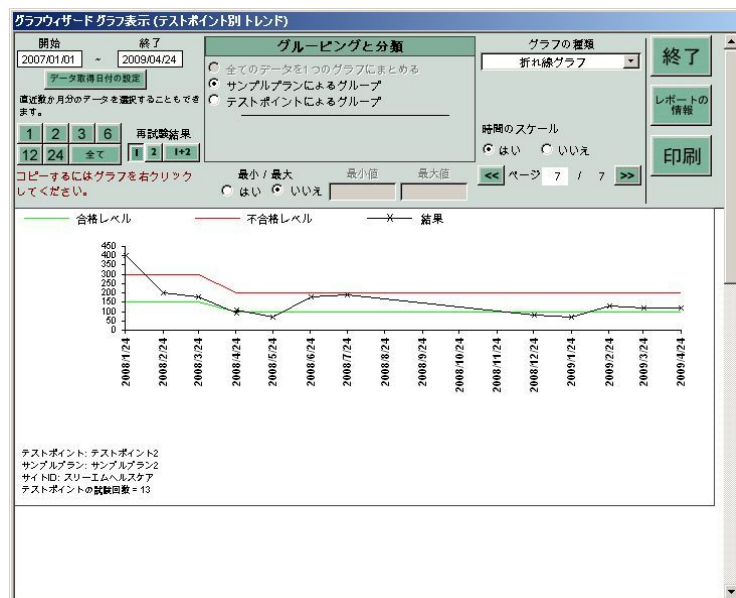

5.1 結果の分析

テストポイント別トレンド総合


- 各テストポイントの試験結果の傾向を表し、清浄度のトレンドの確認に適します。
- サンプルプランに関わらず、テストポイント別にグラフが作成されます。複数のサンプルプランに同一のテストポイントが含まれる場合、テストポイントにおける全ての試験結果を把握することができます。

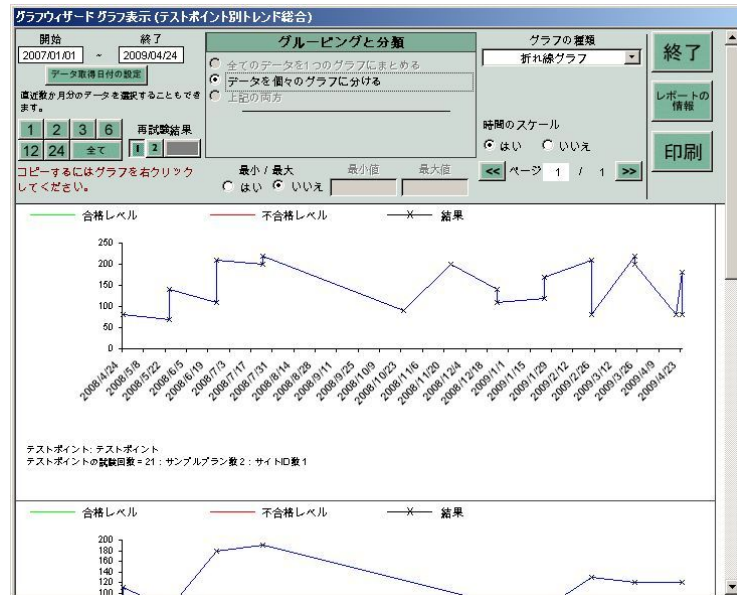

テストポイント別 RLU 範囲

- 各テストポイントの試験結果の幅を表し、清浄度とバラツキの確認に適します。
- サイト ID もしくはサンプルプラン毎に結果を比較することができます。

例) あるテストポイントのバラツキが大きい→突発的な問題が生じている可能性。

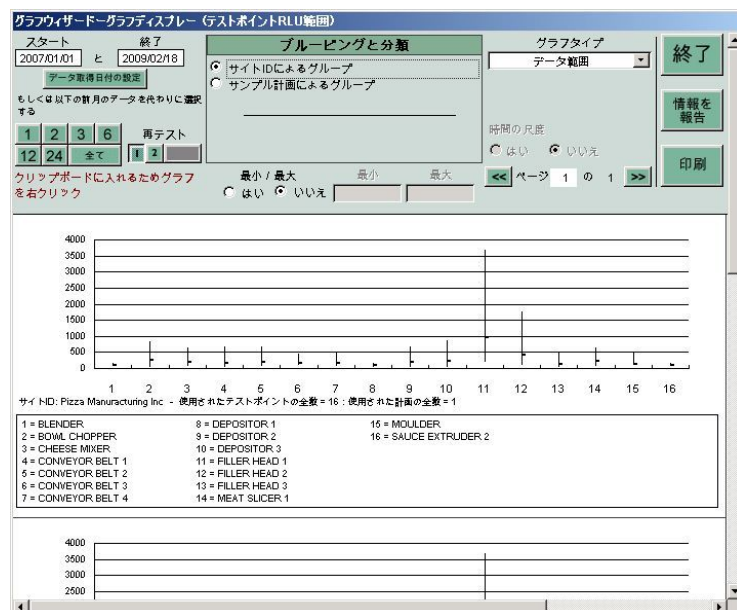


5.1 結果の分析

サイト ID まとめ

- 各サイト ID の合格/注意/不合格の割合を示します。


例) 他のサイトよりも不合格の割合が高い→サイトによって衛生管理のレベルや運用方法が異なる可能性

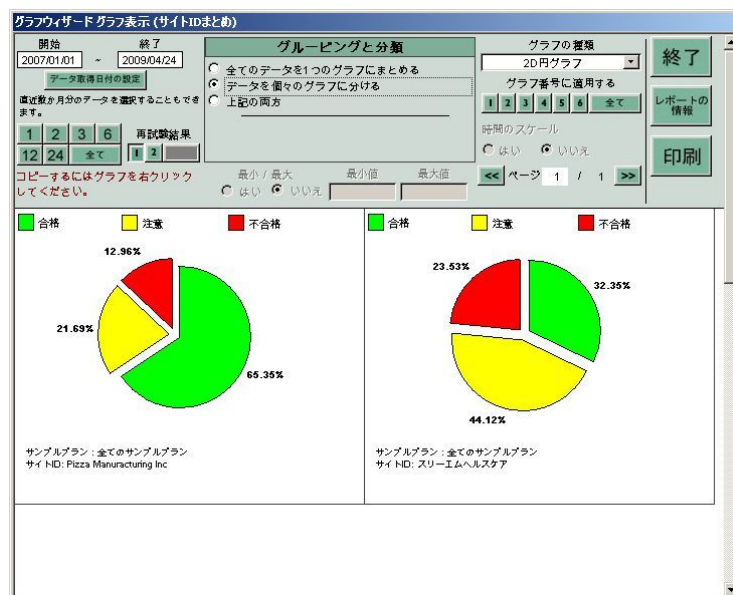

サイト ID 別トレンド

- 各サイト ID の合格/注意/不合格の傾向を示します。

例) 月の後半に不合格が目立つ→サイト全体の定期清掃の頻度が不十分な可能性。

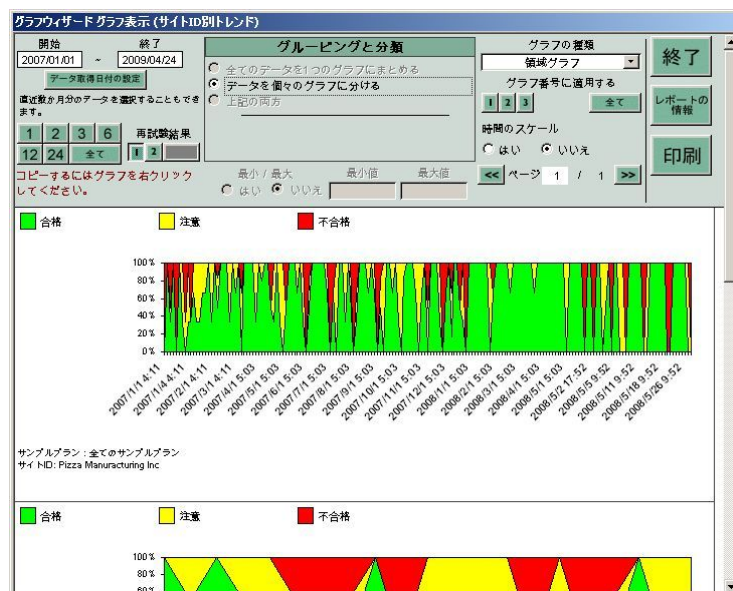


5.1 結果の分析

サイト ID 別 RLU 範囲

- 各サイト ID の試験結果の幅を示します。

例) 他のサイトよりもバラツキが大きい→サイト内に何らかの不具合がある可能性。

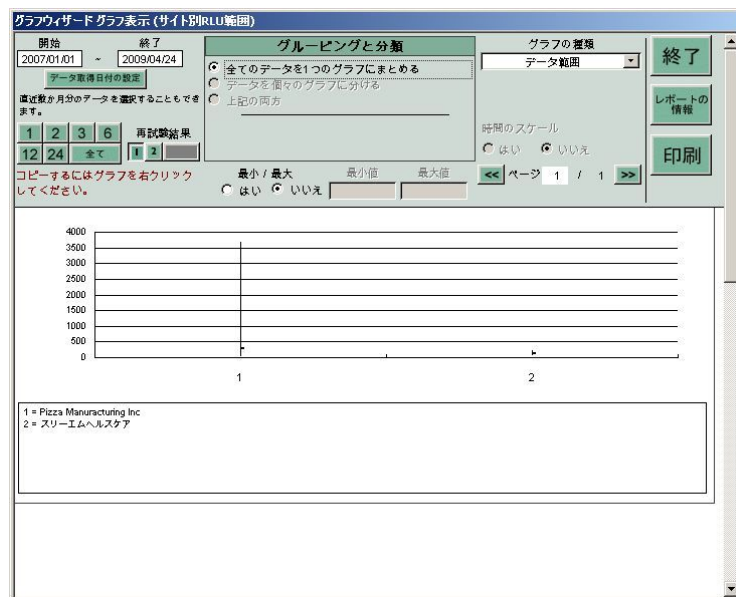

5.1 結果の分析

5.1.8 印刷/衛生管理を見る

「衛生管理計画」は設定期間中の衛生管理計画の進捗を確認するためのツールです。

プランを作成する際に、各テストポイントを衛生管理計画に登録するかを決定します。衛生管理計画に登録するテストポイントについて、洗浄の頻度を設定します。3M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 による測定結果をデータトレンドングソフトに蓄積することによって、清掃が必要な箇所とスケジュールを一目で確認することができるようになります。

1. ドロップダウンリストから「年」と「月」を選択します。

2. ドロップダウンリストから担当者を選択します。選択しない場合には全ての担当者について表示されます。
3. ドロップダウンリストからサンプルプランを選択します。選択しない場合には全てのサンプルプランが表示されます。
4. グループ化の方法を選択します。サンプルプラン別と衛生管理担当者別のいずれかにチェックを入れます。
5. 「衛生管理計画の印刷/表示」をクリックします。

- ・ 予定日は「A」、予定日だったが試験を実施しなかった日は「O」で表示されます。
- ・ 試験を実施した日は、試験結果が数値と色で示されます。測定値が 10000 以上の場合には、便宜上「10k」などと省略して表示されます。

5.1 結果の分析

例) 10051 = 10.1k、10049 = 10k、10050 = 10.1k、10269 = 10.3k


	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	S
	23	24	25	26	27	2
		□	23.3 k	23.3 k	23.3 k	
		300	23.5 k	23.5 k	23.5 k	
			23.0 k	23.0 k	23.0 k	
		□	23.3 k	23.3 k	23.3 k	

5.2 グラフウィザード

5.2 グラフウィザード

選択したデータをもとに、3 ステップで印刷可能なグラフを作成することができます。

1. メインメニューにて「グラフウィザード」をクリックします。
2. 「ステップ3 の1」が表示されます。

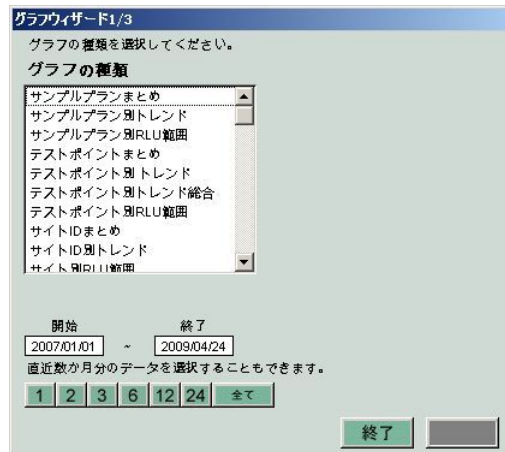

5.2 グラフウィザード

5.2.1 グラフの種類を選択する

1. リストから分析方法を選択します。1 項目のみを選択することができます。選択した名称がタイトルバーに表示され、また、グラフの詳細説明がウィンドウ内に表示されます。
2. 「開始」と「終了」の日付を入力するか、「直近〇か月分」を意味する数字をクリックして、日付の範囲を設定します。
3. 「次>」をクリックします。
4. 「ステップ 3 の 2」が表示されます。

グラフウィザード2/3 (サンプルプランまとめ)

グラフにするサンプルプランを選択してください。

サンプルプラン

サイトID	サンプルプラン
Pizza Manufacturing	PIZZA LINE 1
スリーエムヘルス	サンプルプラン
スリーエムヘルス	サンプルプラン2
スリーエムヘルス	惣菜調理室

分類方法

☒ サイトID ☐ サンプルプラン ☐ テストポイント

一定範囲を選択: 一番上のデータをクリックしてから、Shiftキーを押しながら一番下のデータをクリック

複数を選択: Ctrlキーを押しながら必要なデータをクリック

終了 < 戻る

5. サンプルプランの並び順を変更する場合は「分類方法」のチェックボックスをクリックします。
6. サンプルプランを選択します。一定範囲を選択する場合は、一番上のデータをクリックしてから、Shift キーを押しながら一番下のデータをクリックします。複数を選択する場合は、Ctrl キーを押しながら必要なデータをクリックします。
7. 「次>」をクリックします。
8. 「ステップ 3 の 3」が表示されます。

グラフウィザード3/3 (サンプルプランまとめ)

グラフとレポートのオプションを選択してください。

グルーピングと分類

☒ 全てのデータを1つのグラフにまとめる

☐ データを個々のグラフに分ける

☐ 上記の両方

グラフの形状

2D線グラフ

再試験結果を含めますか?

☒ 初回の試験結果のみを使用

☐ 再試験結果のみを使用

☐ 全ての試験結果を使用

軸のスケールを時間に比例させますか?

☐ はい ☒ いいえ

RLU値の最小値と最大値を設定しますか?

☐ はい ☒ いいえ

最小値 最大値

レポートのタイトル

X軸ラベル

Y軸ラベル

☒ 縦軸 ☐ 横軸

コメント


終了 < 戻る 完了

9. データの分類方法を「グルーピングと分類」から選択します。
10. グラフの形状をドロップダウンリストから選択します。関連するオプションのみ選択可能です。
11. 使用するデータを、「初回の試験結果のみ」「再試験の試験結果のみ」「初回と再試験の両方」のい

5.2 グラフウィザード


ずれかから選択します。再試験を選択した場合、再試験を測定していないグループについては、初回の試験結果が代用されます。

12. 軸のスケールを時間に比例させるかどうかを選択します。比例させる場合、例えば、試験の間隔が2日間であればX軸は1日間の2倍の間隔になります。
13. RLU 値の最小値と最大値を設定するかを決定します。設定する場合には数値を入力します。
14. レポートのタイトルを入力もしくは変更します。タイトルは画面上には表示されず、印刷した場合のみに表示されます。
15. X 軸（通常は横軸）の名前を入力します。
16. Y 軸（通常は縦軸）の名前を入力します。チェックボックスにチェックをすると変更できます。X 軸、Y 軸の名前は画面上に表示されます。
17. 必要に応じてコメントを入力します。コメントは画面上には表示されず、印刷時に最終ページのみに表示されます。
18. 「終了」をクリックします。
19. グラフが表示されます。時間がかかる場合には進捗メーターが表示されます。

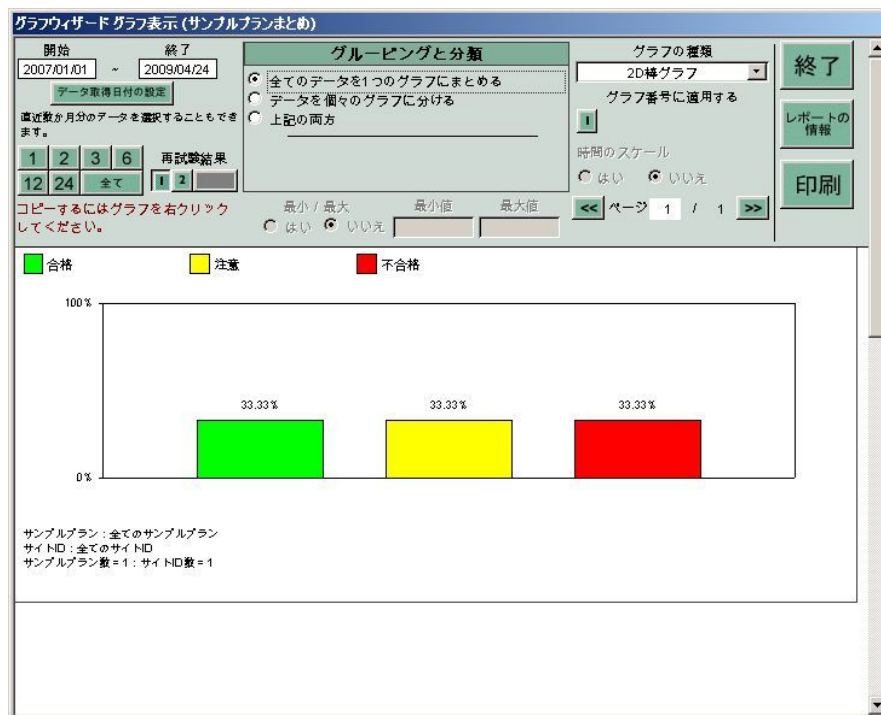

5.3 計画外の分析


「計画外のテスト」で得られた試験結果を確認することができます。

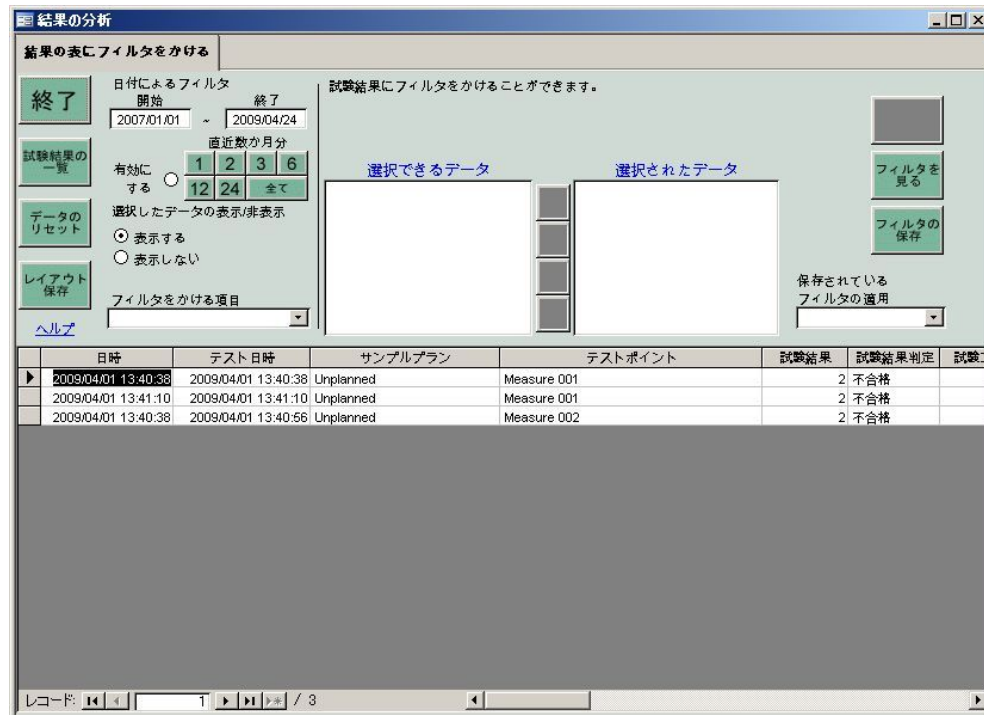

「試験結果の一覧」をクリックすると出力することができます。また、結果の表のデータをドラッグして選択してから Ctrl キーを押しながら “c” を押すと、データをコピーすることができます。

5.3.1 計画外のテストの結果の印刷

1. 事前に機器から結果を転送しておく必要があります。メインメニューにて「機器から結果を転送する」をクリックします。「通信状況のチェック」と表示された後に「機器から試験結果を転送する」が表示されます。

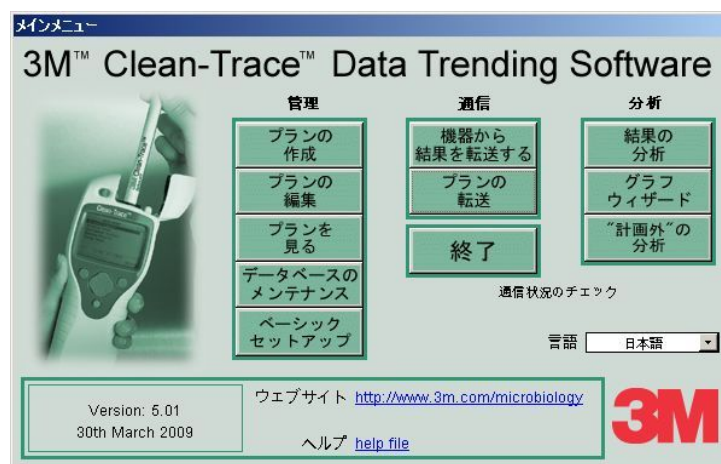


2. リストボックスから転送するサンプルプランを選択します。計画外のテストに該当する「*** UNPLANNED RESULTS ***」を選択します。


5.3 計画外の分析



3. 「転送する」をクリックします。3 M™ クリーントレース™ ルミノメーター UNG3 から試験結果が転送されます。

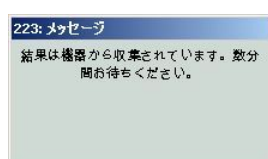

4. UNG3 をパソコンから切り離します。
5. メインメニューにて「” 計画外” の分析」をクリックします。

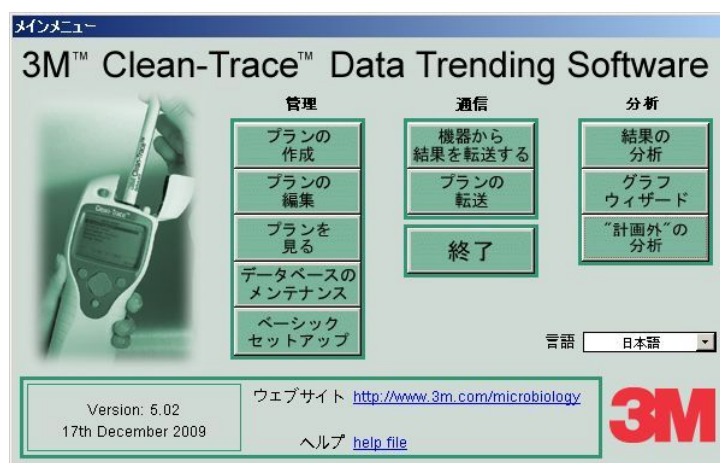

5.3 計画外の分析

- 必要に応じて試験結果にフィルタをかけてから、「試験結果の一覧」をクリックします。


- ツールバーの印刷ボタンをクリックして印刷します。

5.3 計画外の分析


5.3.2 計画外のテストの結果のエクスポート

「計画外のテスト」で測定したデータの分析画面は「プログラムモード」に比べて簡略化されており、同様の方法ではデータをエクスポートすることができませんが、データを外部のアプリケーションに貼り付けることによって、Microsoft Excel 形式やテキスト形式で保存することができます。

1. メインメニューにて「” 計画外” の分析」をクリックします。

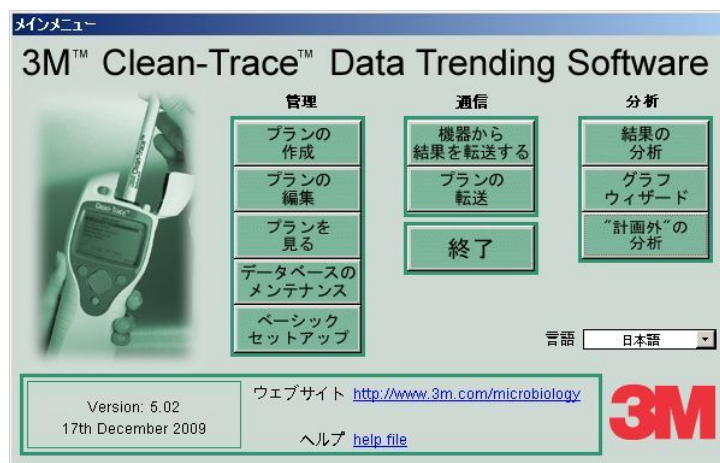


2. 結果の一覧表の左上の四角（「日時」の左側）をクリックします。

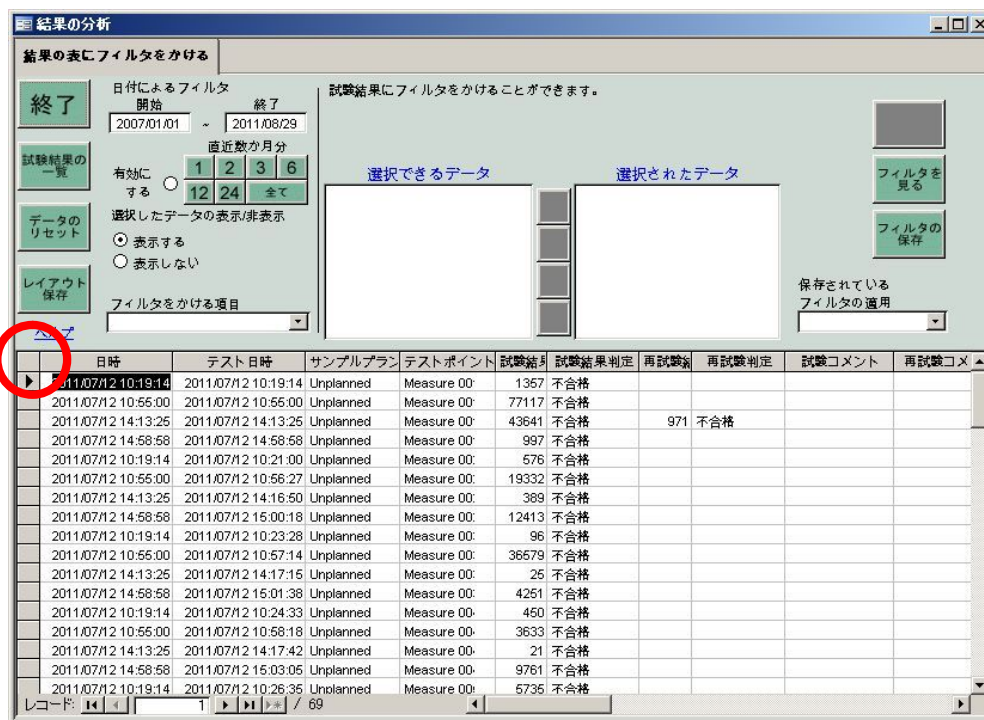


5.3 計画外の分析

- 結果の一覧表の全体が選択された状態（反転した状態）で、コントロールキー（キーボードにある、Ctrl、CTRL、Control などと書いてあるキー）を押しながら、C キーを押します。画面表示は変わりませんが、データがクリップボードにコピーされます。

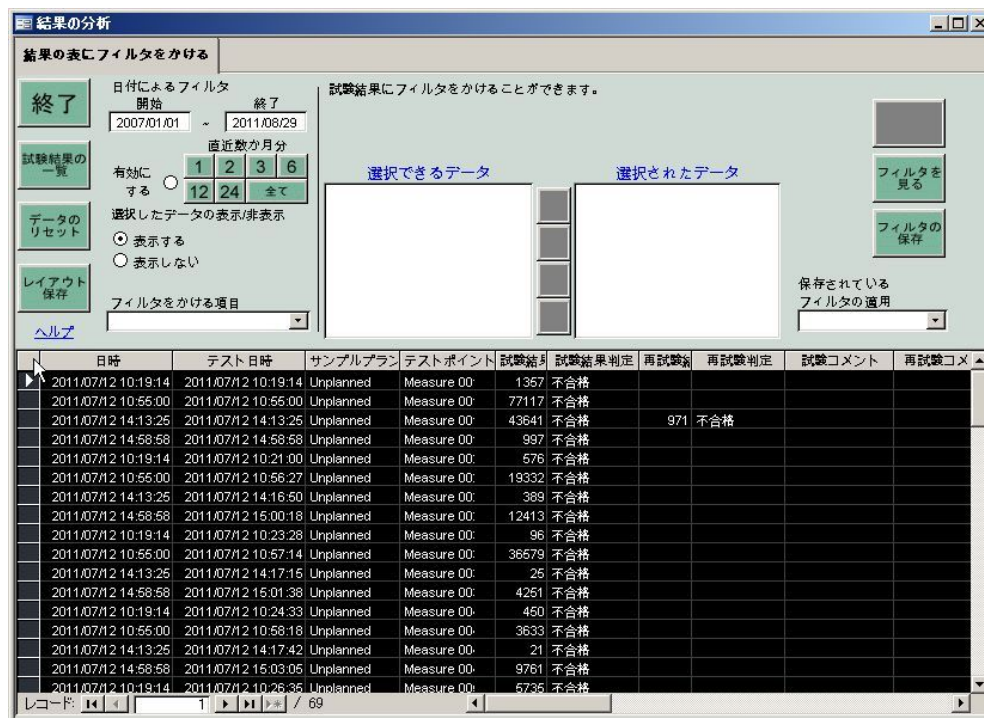

- 外部のアプリケーションに貼り付けて保存します。Microsoft Excel の場合には、A1 のセルが選択された状態で、[編集(E)]-[貼り付け(P)]をクリックすると、貼り付けることができます。メモ帳に貼り付けてテキスト形式で保存することもできます。

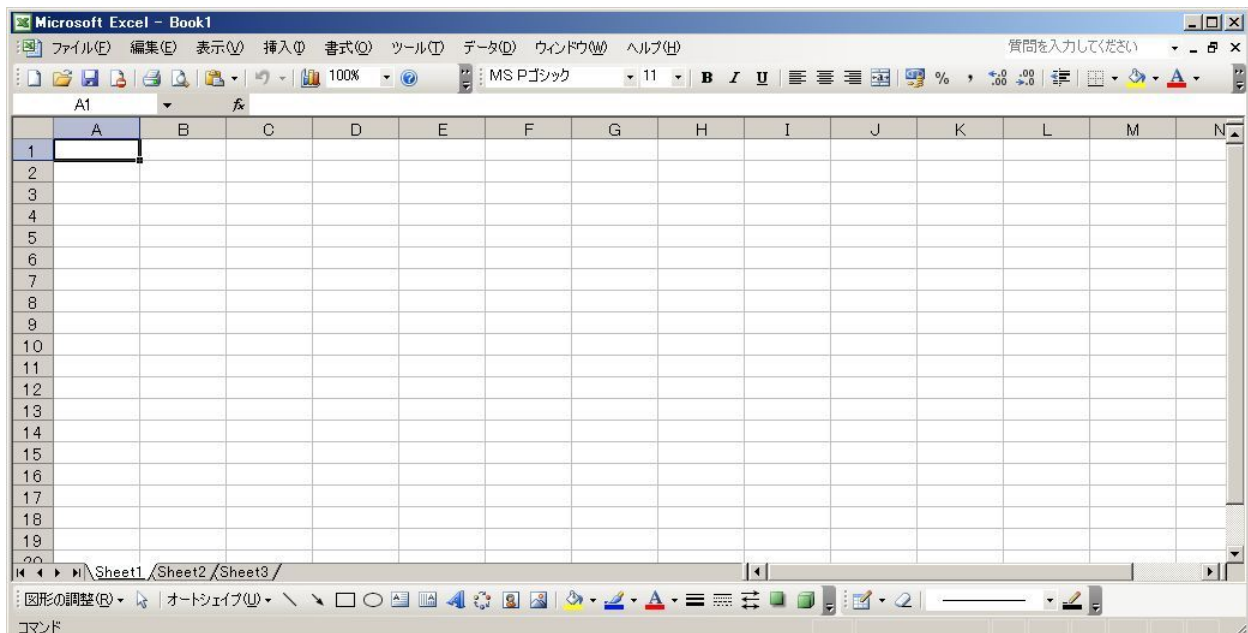


6.1 パスワードの初期化

6 その他

6.1 パスワードの初期化

パスワードを忘れてしまった場合には以下の方法で再設定してください。

1. 「ベーシックセットアップ」をクリックします。

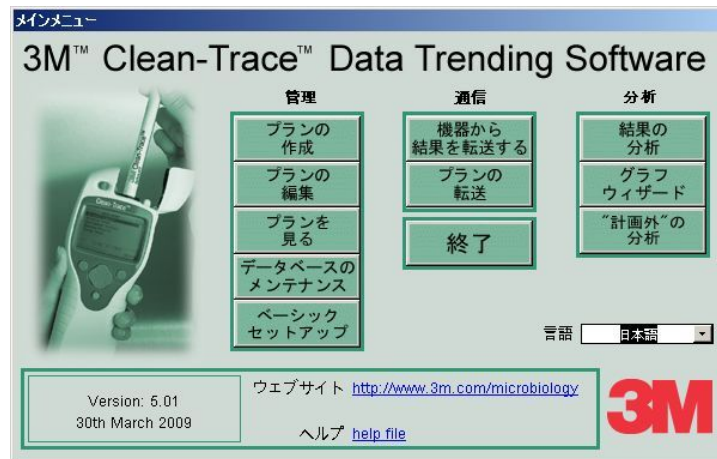


2. 「パスワードの変更」をクリックします。



3. 古いパスワードの欄に「BiotrackPlus+」と入力します。

日本語入力が ON になっているとパスワードがうまく入力できません。この場合、入力した文字数よりも「*」の数が少なく表示されます。日本語入力を OFF にしてからパスワードを入力してください。

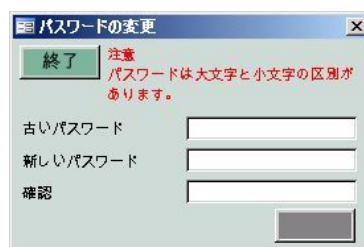

4. Enter キーもしくは Tab キーを押すと、パスワードが初期化されます。


初期設定は temp123 となっています。

5. 「OK」をクリックします。


6.1 パスワードの初期化




6. 「古いパスワード」のテキストボックスに、「temp123」と入力します。

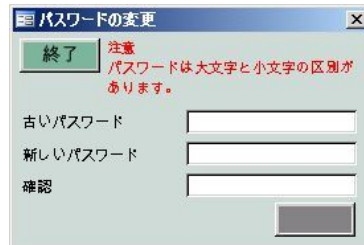

7. 新しいパスワードを入力します。
8. 「確認」のテキストボックスに新しいパスワード（上記と同じのもの）を入力します。
9. Enter キーもしくは Tab キーを押すと「変更の保存」ボタンが表示されます。
10. 「変更の保存」をクリックすると、新しいパスワードが保存されます。

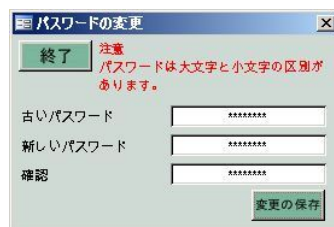

11. 「OK」をクリックします。

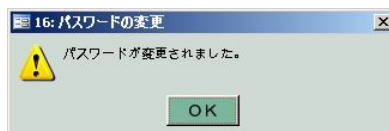

修理等に関するお問い合わせ

スリーエム ヘルスケア株式会社

ハードグッズサポートセンター

0120-158-211（フリーダイヤル）

受付時間 9：00～17：00 月～金（土・日・祝日を除く）

製品についてのお問い合わせ

スリーエム ヘルスケア株式会社

カスタマーコールセンター

0570-011-321（ナビダイヤル）

受付時間 8：45～17：15 月～金（土・日・祝日を除く）

3M、Clean-Trace、クリーントレースは、3M社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

©3M 2012. All Rights Reserved.

スリーエム ヘルスケア株式会社
食品衛生市場プロジェクト部